



## Guía de usuario

### Contenido


Primeros pasos en KARDION .....	2
Crear un centro .....	2
Vincular un dispositivo con tu cuenta KARDION .....	5
Asignar un dispositivo .....	7
Enviar una prueba a revisión .....	9
Crear un paciente nuevo .....	10
Buscar un paciente .....	11
Rellenar y adjuntar la prueba .....	12
Recuperar la contraseña perdida .....	13
Cambiar mi contraseña .....	14

## Primeros pasos en KARDION


Para empezar a enviar pruebas desde KARDION debe configurar algunas Funciones antes. A continuación, se describen dichos pasos.

### Crear un centro


El primer paso será crea un centro para enviar las pruebas desde el. Para crear un centro nuevo haga click en la opción “Centros” localizado en el menú latera

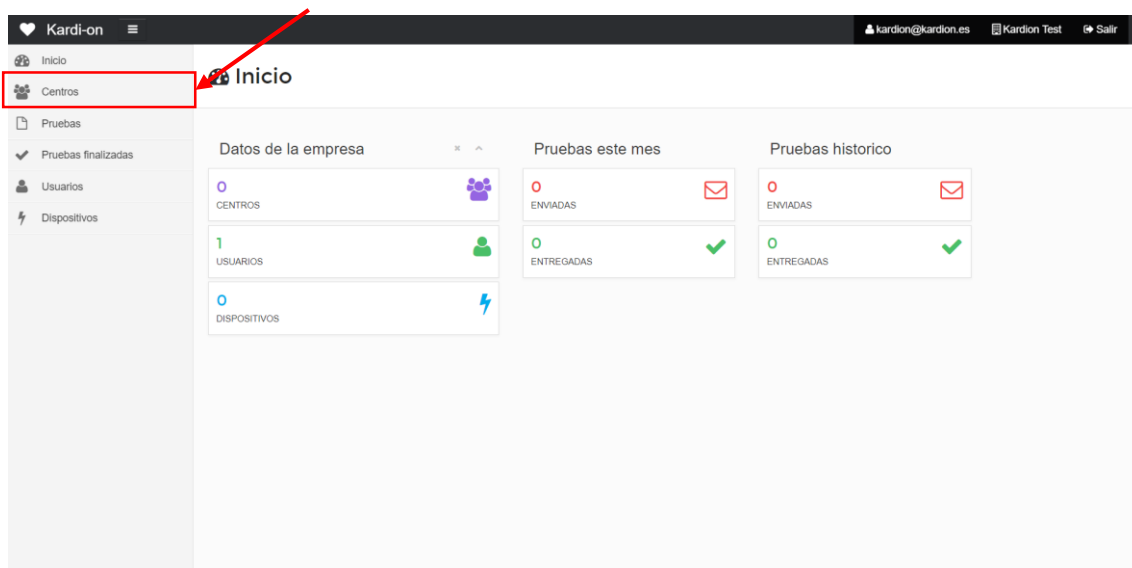

A continuación, se muestra una lista con los centros creados. Haga click en el botón “Nuevo”

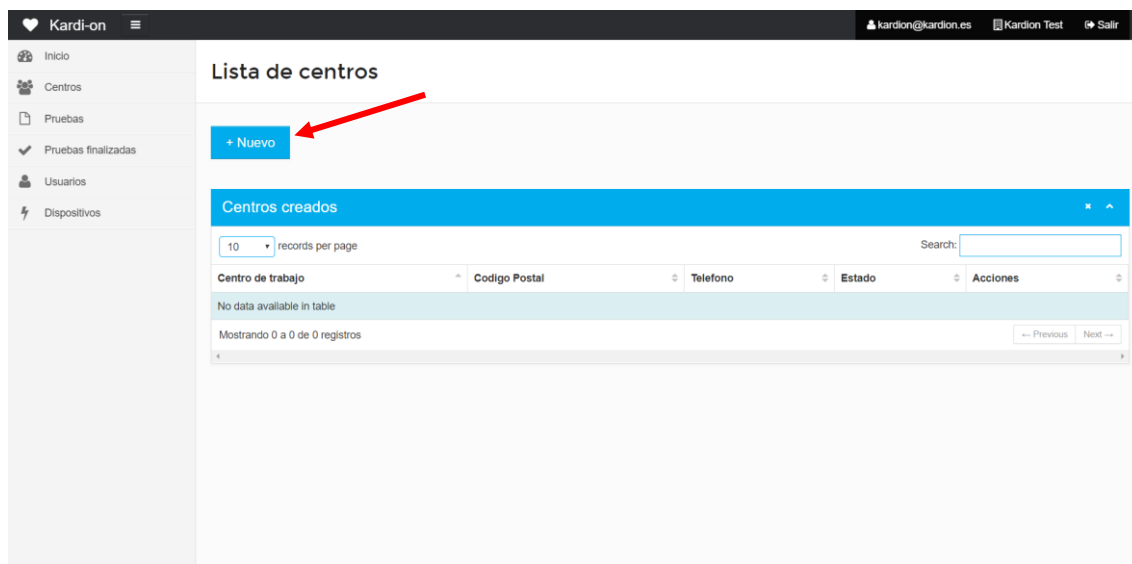


Rellena los datos del centro en el formulario que parece a continuación.

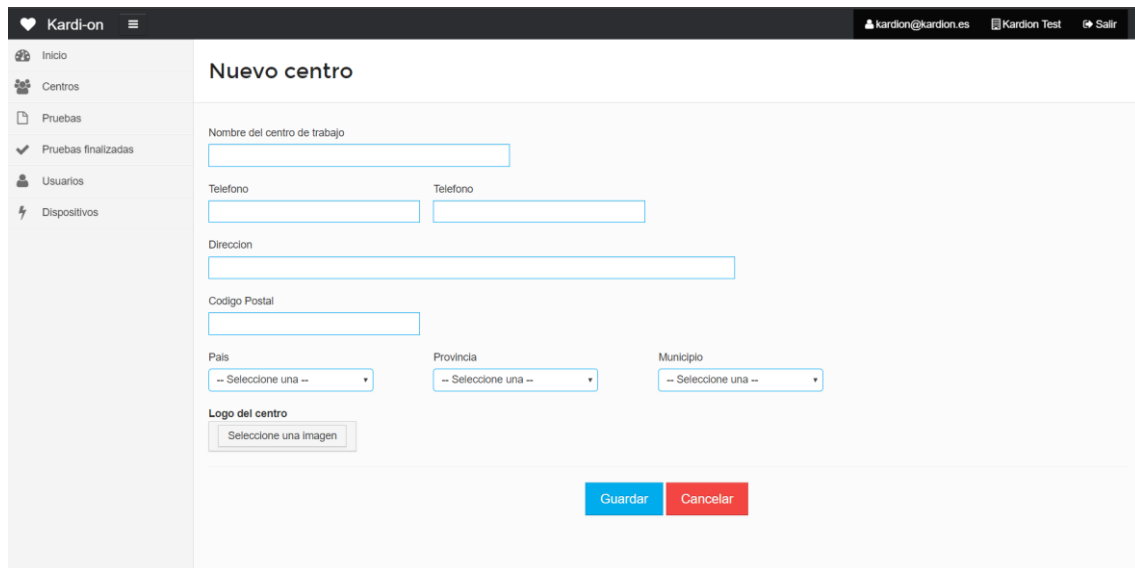


Importante: debes seleccionar el logotipo del centro ya que este se mostrará en los informes médicos.

Para seleccionar el logotipo del centro haga click en el botón “seleccione una imagen” y a continuación desplázate hasta la carpeta donde tengas almacenado el logotipo de tu centro.

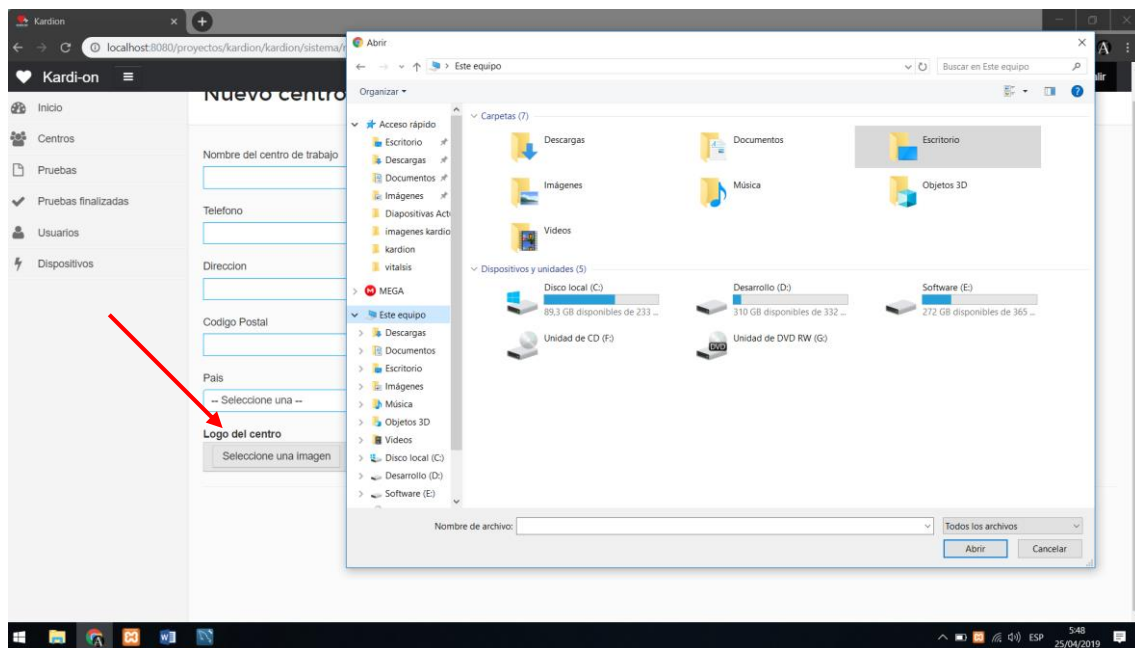

Para finalizar has click en el botón “Guardar”, Se mostrará una ventana confirmando que el centro ha sido creado

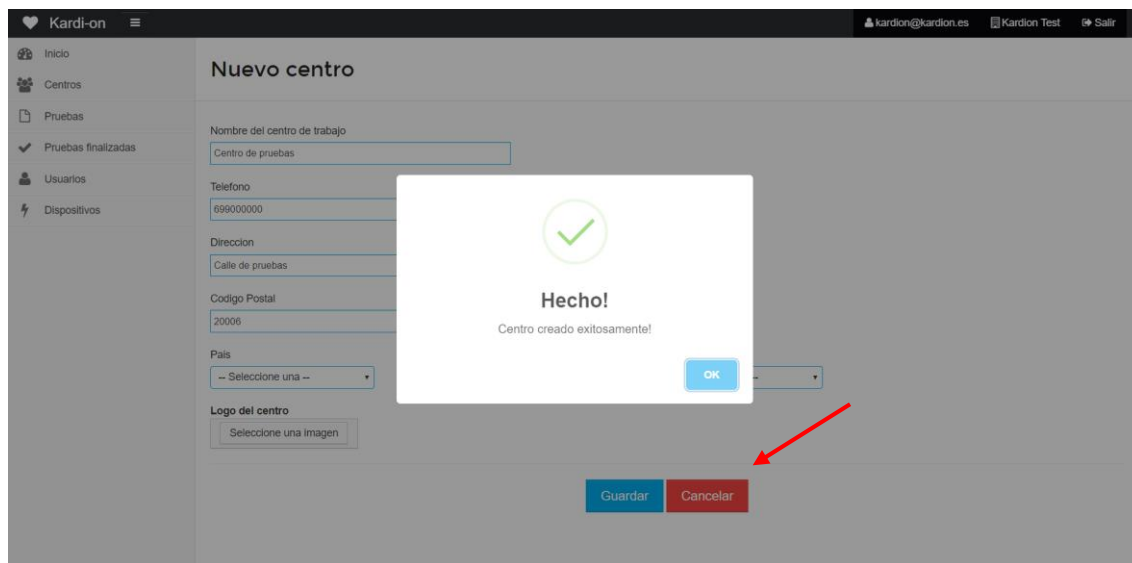

**Nuevo centro**

Nombre del centro de trabajo  
Centro de pruebas

Telefono  
699000000

Direccion  
Calle de pruebas

Codigo Postal  
20006

País  
-- Seleccione una --


Logo del centro  
Seleccione una imagen

**Hecho!**  
Centro creado exitosamente!

OK

Guardar Cancelar

KARDION te direccionara automáticamente a la lista de centros. Si deseas modificar los datos del centro (nombre, dirección, teléfono y logotipo). Haga click en el botón editar y guarda los cambios.

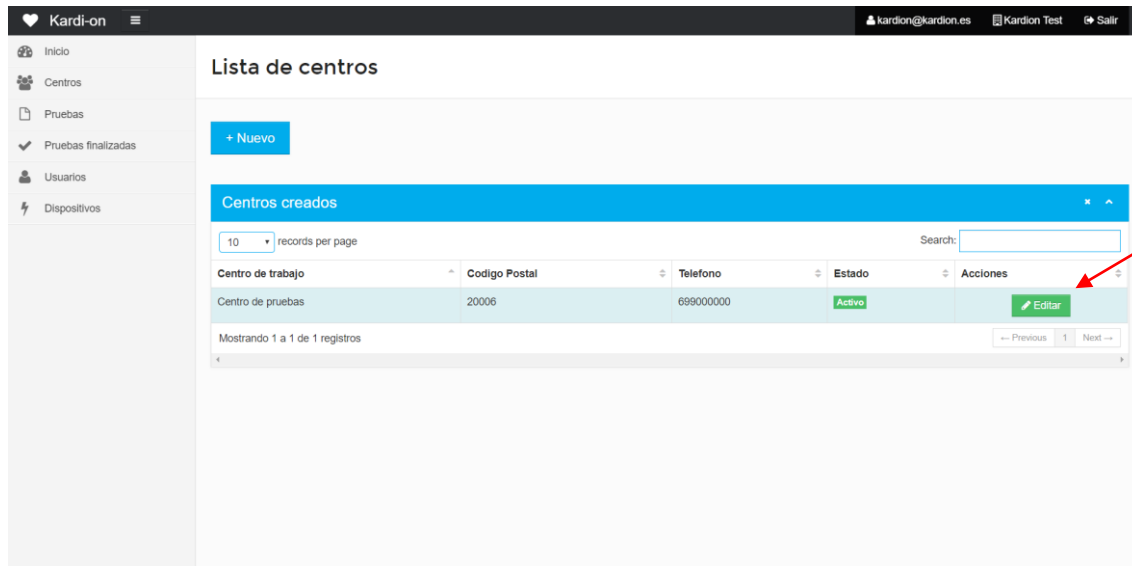

**Lista de centros**

+ Nuevo

Centros creados

10 records per page Search:


Centro de trabajo	Codigo Postal	Telefono	Estado	Acciones
Centro de pruebas	20006	699000000	Activo	Editar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros


Previous 1 Next

## Vincular un dispositivo con tu cuenta KARDION

Para vincular un dispositivo o varios haga click en el botón “Dispositivos” ubicado en el menú lateral.

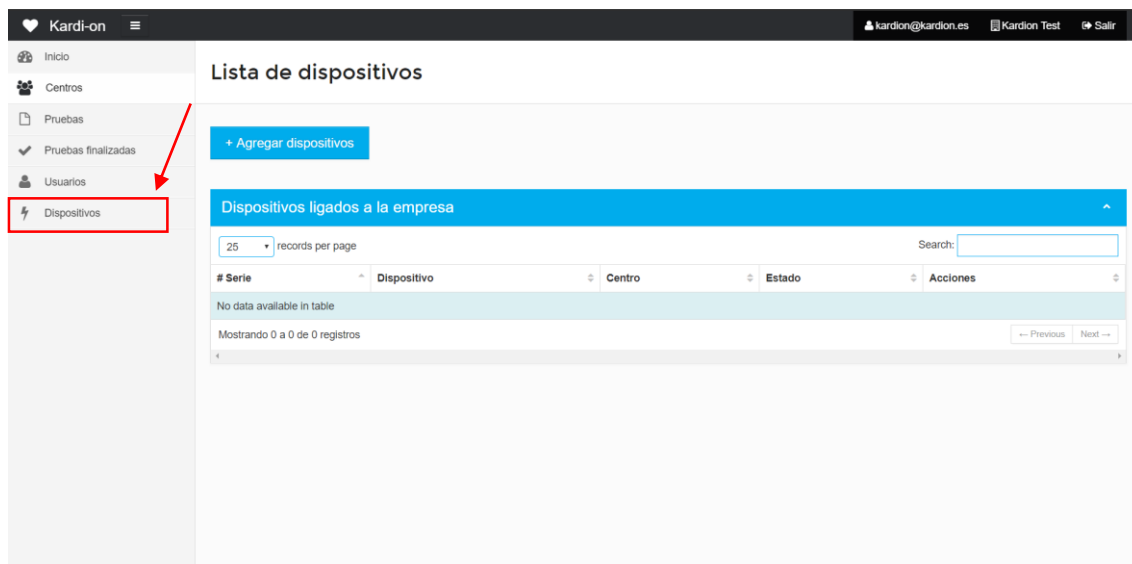


A continuación, se muestra una lista con los dispositivos vinculados. Haga click en el botón “Agregar dispositivos”

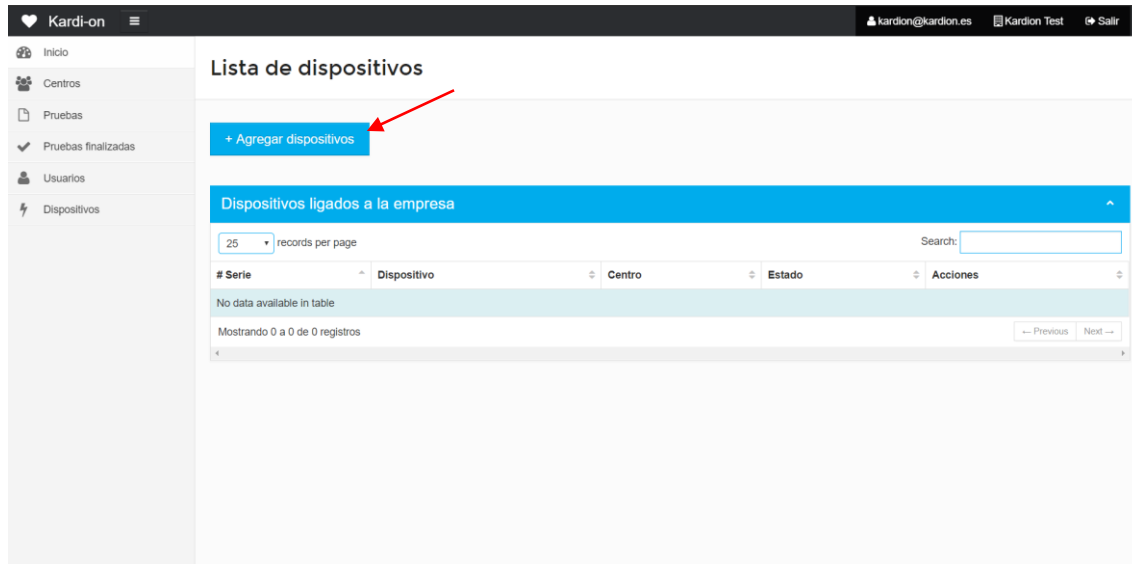


Recuerda tener tu dispositivo a mano.

Escribe el número de serie del dispositivo y selecciona el modelo

Importante: el número de serie que escribas debe y el modelo que selecciones deben coincidir con la etiqueta en la parte posterior de tu dispositivo.

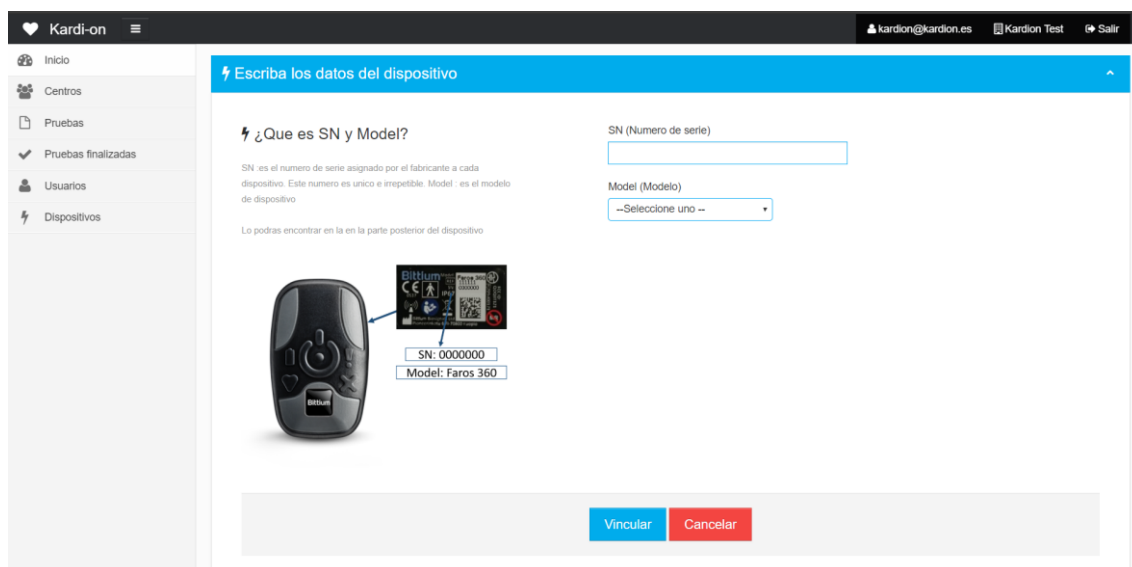


A continuación, haga click en el botón “Vincular “. KARDION le mostrara un mensaje de confirmación

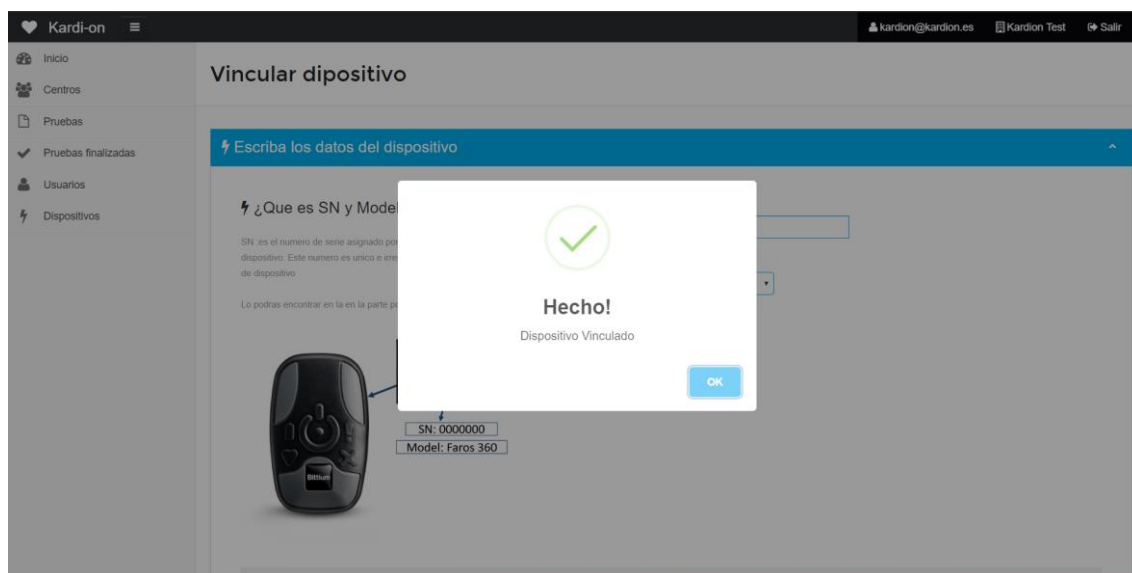

KARDION le direccionara automáticamente a la lista de Dispositivos

## Asignar un dispositivo

Para poder enviar pruebas desde KARDION debe asignar un **dispositivo** a un **centro**. Diríjase hacia el botón dispositivos en el menú lateral y haga click sobre él.

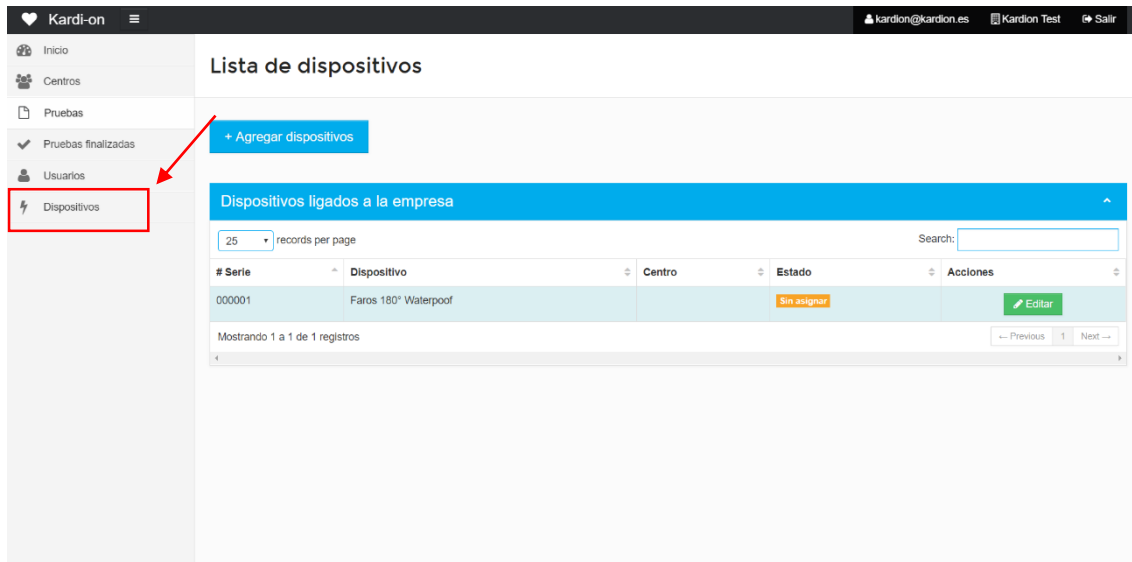

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa

25 records per page Search:

# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof		Sin asignar	<a href="#">Editar</a>


Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next

Se mostrará un listo con todos dispositivos vinculados a tu cuenta. En dicha lista se muestran ordenados los dispositivos por número de serie, el “estado” define la situación en la que se encuentra actualmente el dispositivo.

Si es la primera vez que realiza estos pasos tendrá un dispositivo con el estado “Sin Asignar” marcado con color amarillo.

Para asignar el dispositivo haga click en el botón “Editar” correspondiente al dispositivo que quiera asignar

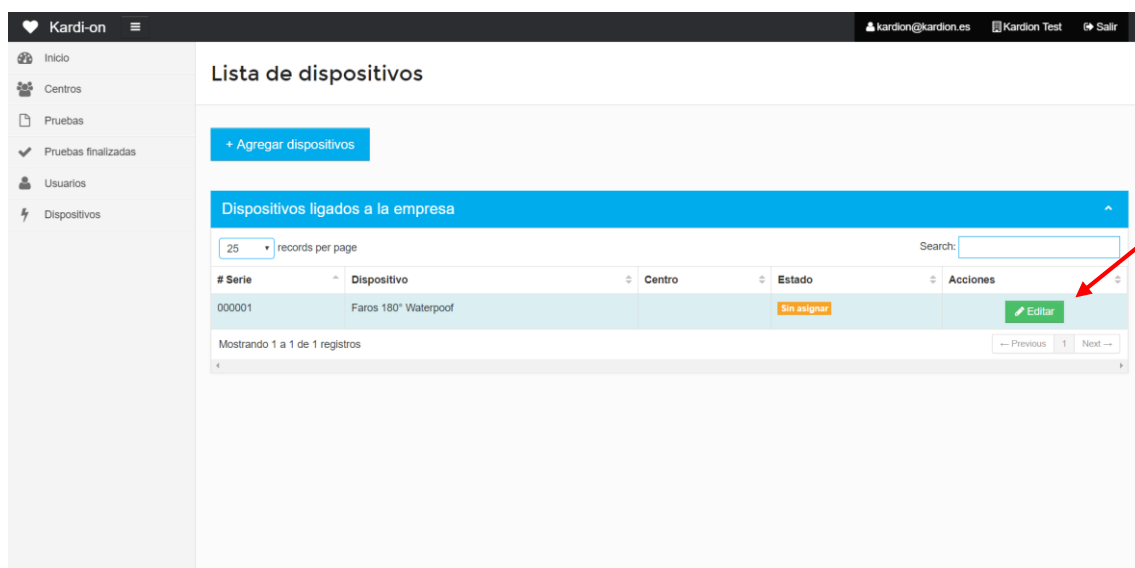

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa


25 records per page Search:

# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof		Sin asignar	<a href="#">Editar</a>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next

Se mostrará una pantalla con los datos del dispositivo y el estado. Selecciona el centro al que quieras asignar el dispositivo y haga click en el botón “Guardar”

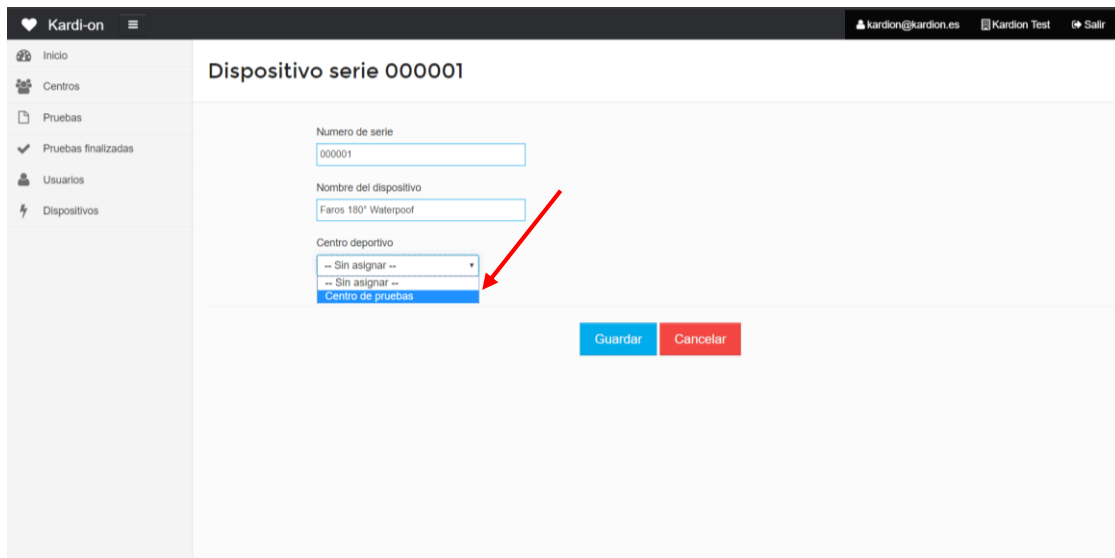

Dispositivo serie 000001


Numero de serie  
000001

Nombre del dispositivo  
Faros 180° Waterproof

Centro deportivo  
 -- Sin asignar --  
 -- Sin asignar --  
 Centro de pruebas

Guardar Cancelar

El estado del dispositivo debería aparecer en color verde y con el texto “Asignado”

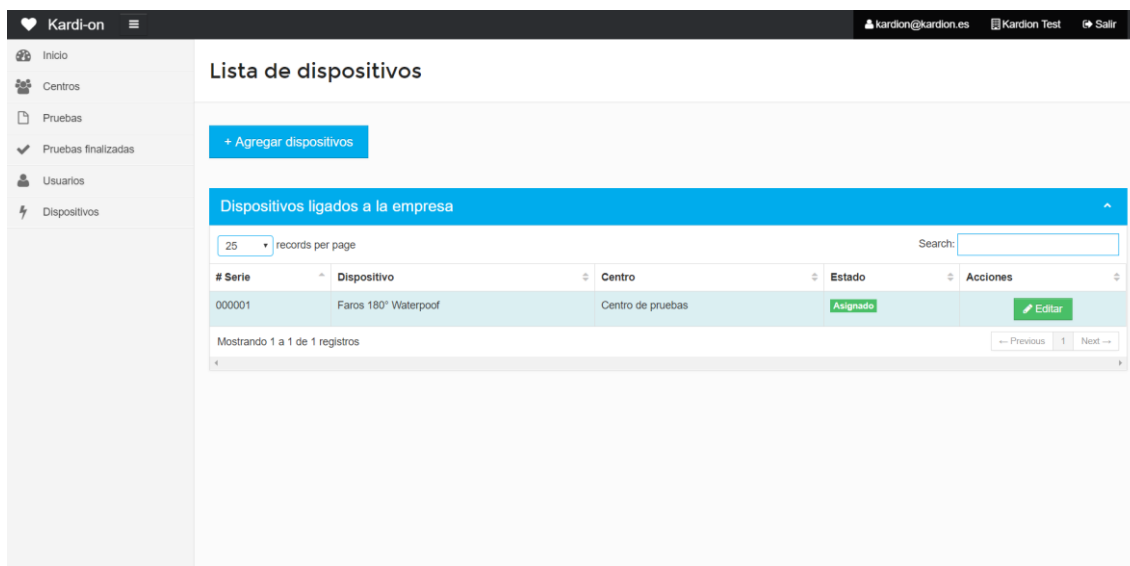

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa

25 records per page Search:

# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof	Centro de pruebas	Asignado	Editar


Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next




## Enviar una prueba a revisión

Para enviar una prueba haga click en el botón “Pruebas” en el menú lateral.

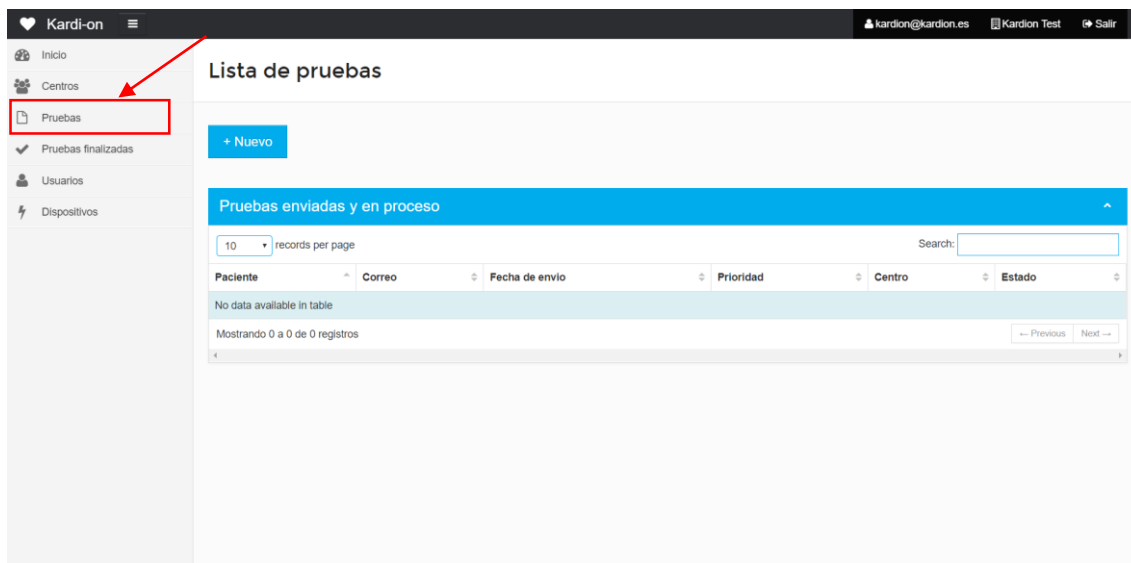

A continuación, se muestra una lista con todas las pruebas que estén pendientes o en proceso de revisión.

Para crear una nueva prueba has click en el botón “Nuevo”

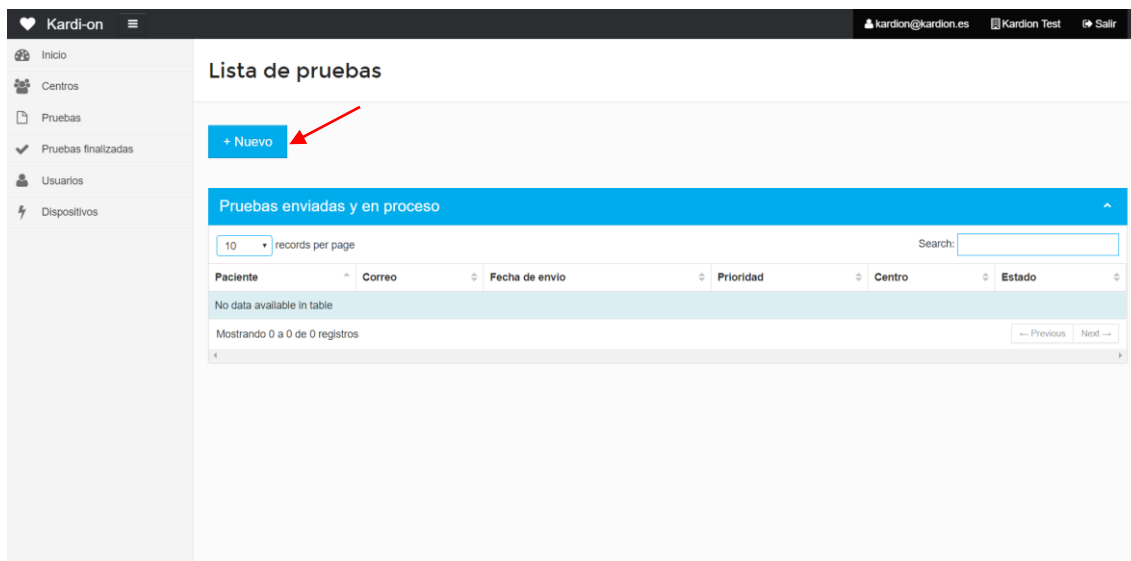


Tienes dos opciones:

- Buscar un paciente existente
- Crear un paciente nuevo

## Crear un paciente nuevo


Para crear un paciente nuevo. En la ventana “nueva prueba” haga click en el botón “Crear Paciente”

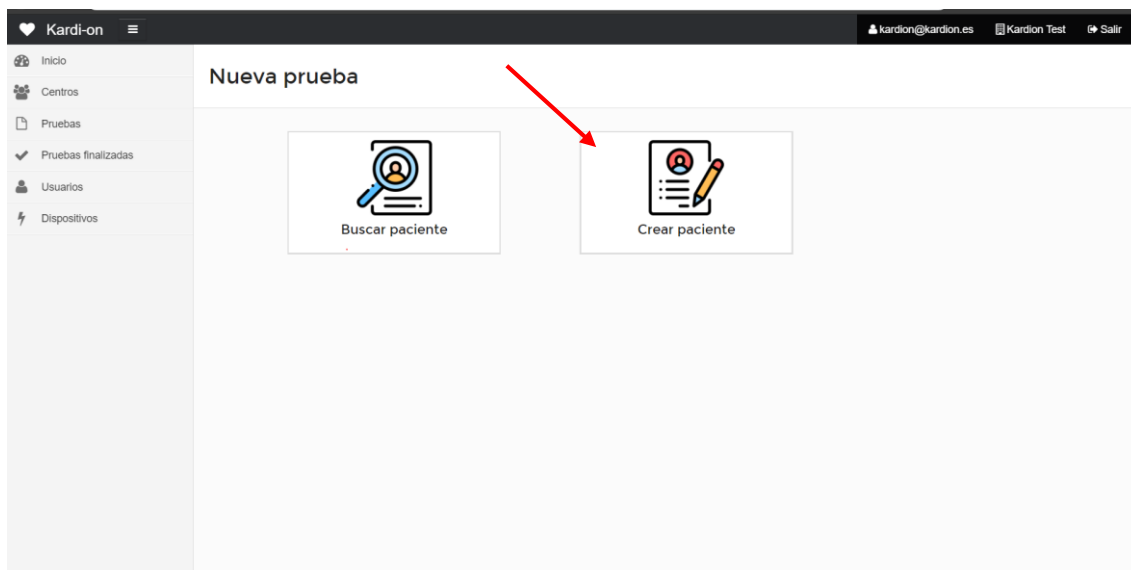

A continuación, se mostrará una ventana emergente con un formulario que deberá rellenar con los datos del paciente.

**Importante :** El campo “Correo Electrónico” debe ser el correo personal del paciente o un correo al que el paciente tenga acceso ya que Kardion enviara un correo de confirmación de cuenta y la política de privacidad.


Para finalizar haga click en guardar.

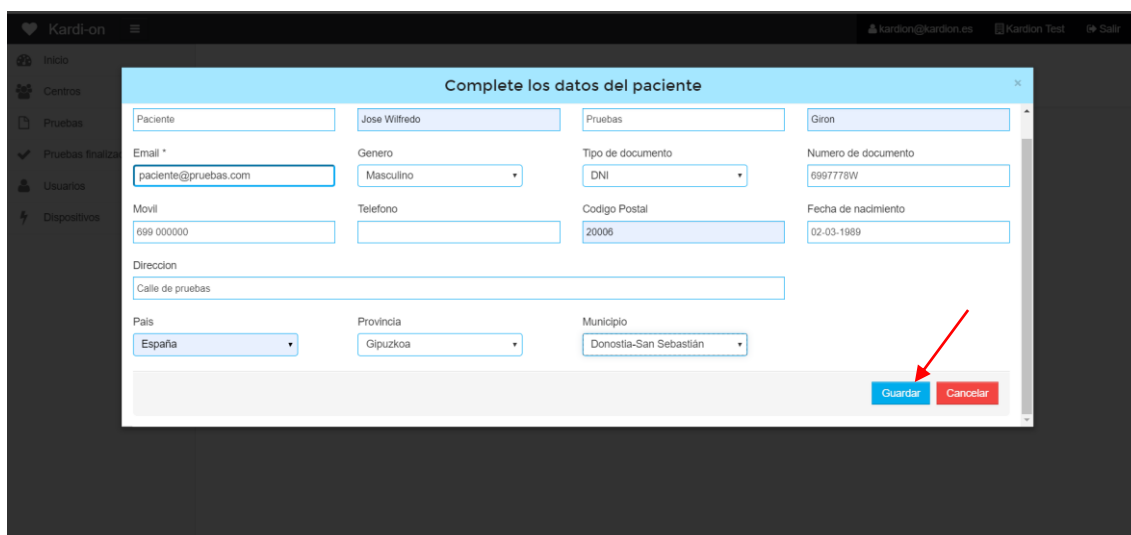


Complete los datos del paciente			
Paciente	Jose Wilfredo	Pruebas	Giron
Email *	Genero	Tipo de documento	Numero de documento
paciente@pruebas.com	Masculino	DNI	6997778W
Movil	Telefono	Codigo Postal	Fecha de nacimiento
699 000000		2006	02-03-1989
Direccion			
Calle de pruebas			
Pais	Provincia	Municipio	
Espana	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	
<div> <span>Guardar</span> <span>Cancelar</span> </div>			

## Buscar un paciente

Para buscar un paciente existente. En la ventana “nueva prueba” haga click en el botón “Buscar Paciente”

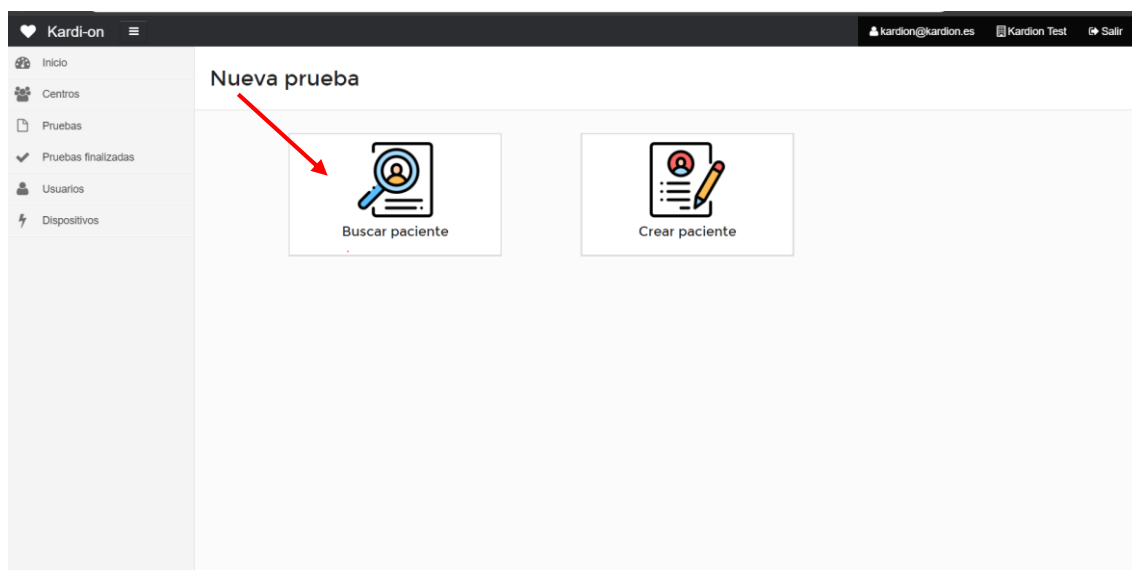

A continuación, se mostrará una ventana emergente un campo único en el cual deberá escribir el nombre o el correo electrónico del paciente y haga click en el botón “Buscar”

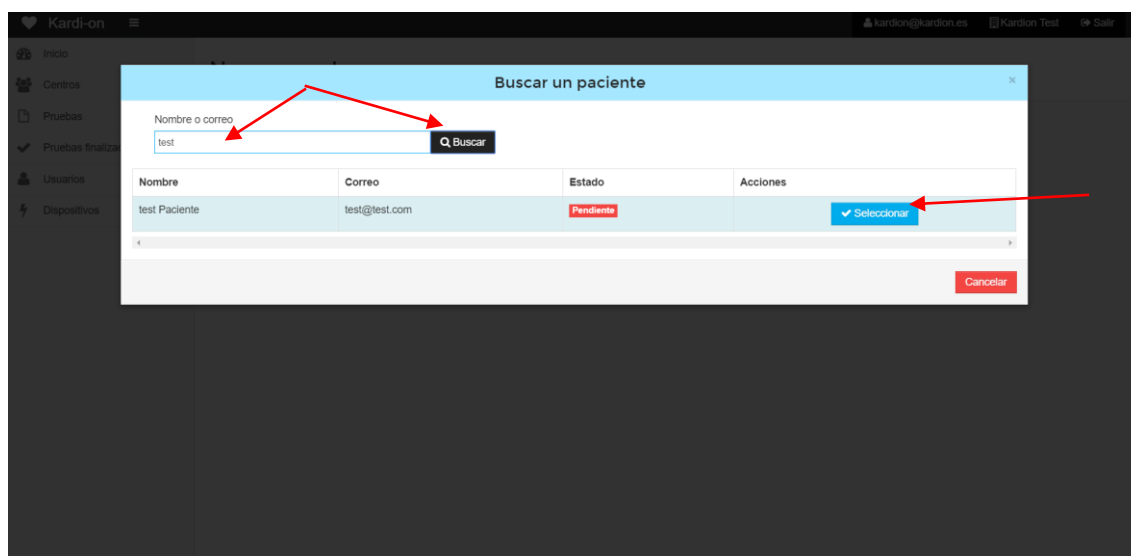


Se mostrará una lista con los pacientes que coincidan con su búsqueda. A continuación, haga click en el botón seleccionar correspondiente al paciente.

## Rellenar y adjuntar la prueba

Habiendo creado o seleccionado un paciente en la pantalla “nueva prueba” KARDION le direccionara a un formulario para adjuntar y llenar la información de la prueba realizada

En el deberá llenar datos obligatorios como el centro del que se envía la prueba, el dispositivo con el que fue realizada la prueba y el archivo de la prueba.

**Importante:** Entre más datos llene sobre la prueba. El resultado medico será más preciso.

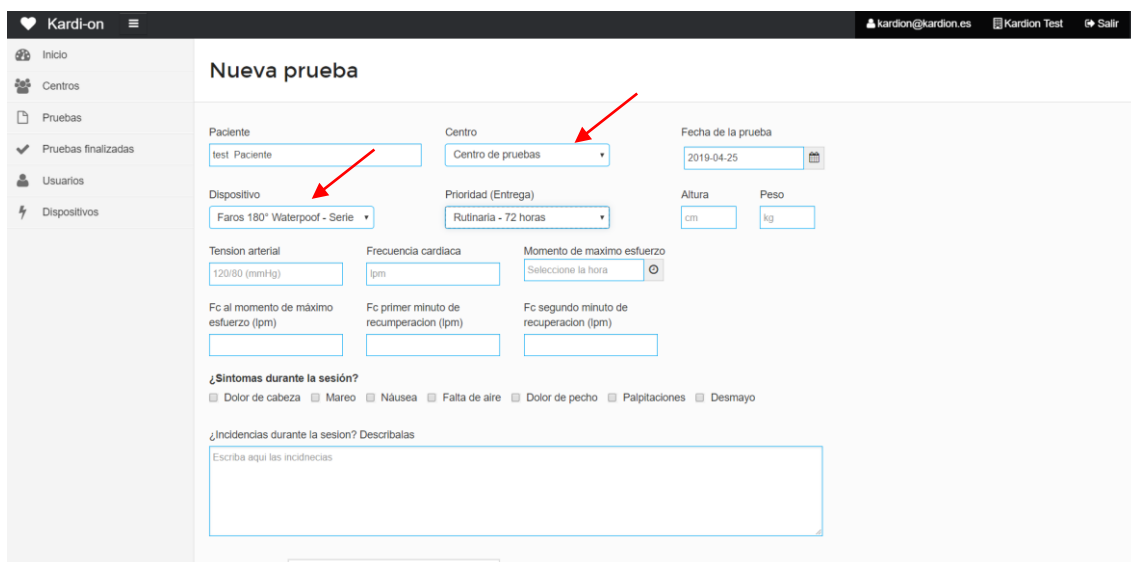

**Nueva prueba**

Paciente: test Paciente

Centro: Centro de pruebas

Fecha de la prueba: 2019-04-25

Dispositivo: Faros 180° Waterproof - Serie

Prioridad (Entrega): Rutina - 72 horas

Altura: cm

Peso: kg

Tension arterial: 120/80 (mmHg)

Frecuencia cardiaca: bpm

Momento de máximo esfuerzo: Seleccione la hora

Fc al momento de máximo esfuerzo (bpm):

Fc primer minuto de recuperación (bpm):

Fc segundo minuto de recuperación (bpm):


¿Síntomas durante la sesión?

☐ Dolor de cabeza ☐ Mareo ☐ Náusea ☐ Falta de aire ☐ Dolor de pecho ☐ Palpitaciones ☐ Desmayo

¿Incidentes durante la sesión? Describalas

Escribe aquí las incidencias

**Adjunte la prueba:** para adjuntar la prueba haga click en el botón “Adjuntar archivo de la prueba”, se abrirá una ventana en la cual deberá seleccionar el archivo de la prueba ECG, dicho archivo se encuentra ubicado en la memoria de su dispositivo en la carpeta **DATA**.

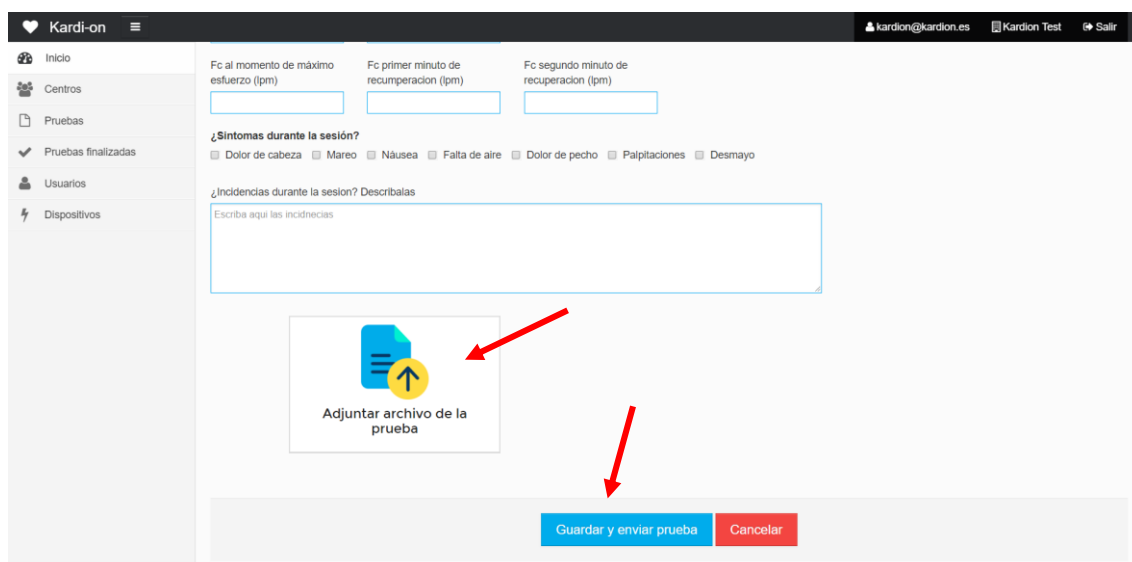

Fc al momento de máximo esfuerzo (bpm):

Fc primer minuto de recuperación (bpm):

Fc segundo minuto de recuperación (bpm):

¿Síntomas durante la sesión?

☐ Dolor de cabeza ☐ Mareo ☐ Náusea ☐ Falta de aire ☐ Dolor de pecho ☐ Palpitaciones ☐ Desmayo

¿Incidentes durante la sesión? Describalas

Escribe aquí las incidencias

Adjuntar archivo de la prueba


Guardar y enviar prueba Cancelar

Para finalizar haga click en el botón Guardar y enviar

## Recuperar la contraseña perdida

### Paso 1:


Entra en [www.kardion.es](http://www.kardion.es) y a continuación haga click en el enlace “Recuperar”

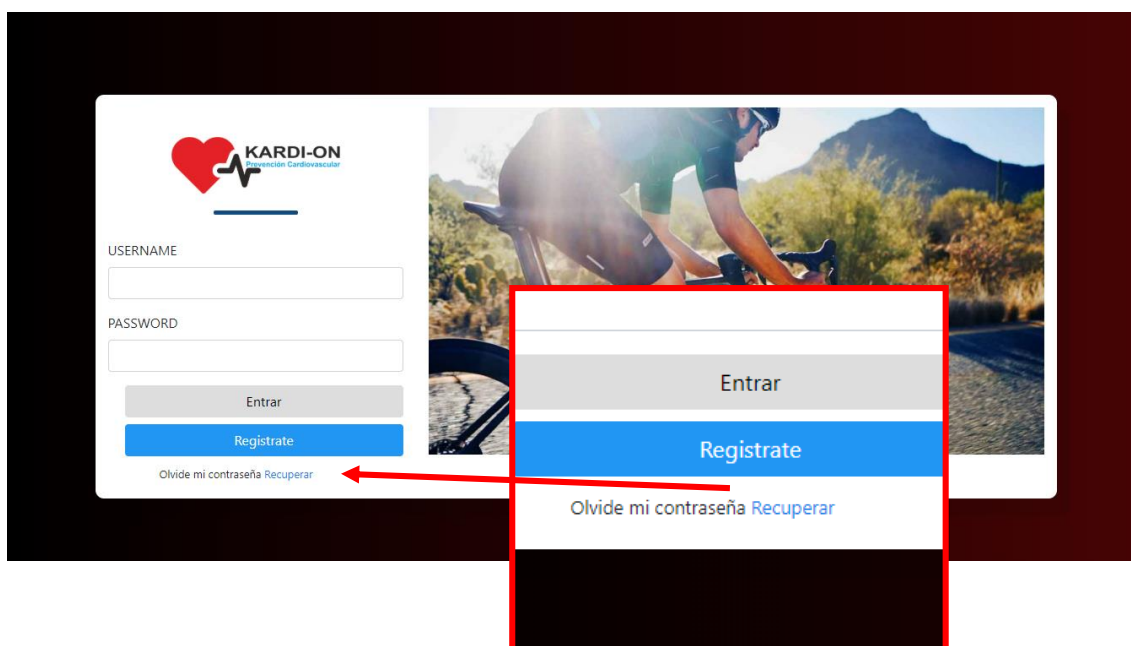

The screenshot shows the KARDI-ON login page. On the left, there is a login form with fields for 'USERNAME' and 'PASSWORD', and buttons for 'Entrar' and 'Registrate'. Below the 'Registrate' button is a link that says 'Olvide mi contraseña Recuperar'. A red arrow points from this link to a red-bordered box on the right. This box contains a zoomed-in view of the login buttons and the 'Recuperar' link, which is highlighted in blue.

### Paso 2:

Escriba su correo electrónico con el que se ha registrado y presione el botón enviar. Kardion te enviara un correo electrónico con una contraseña nueva generada aleatoriamente.

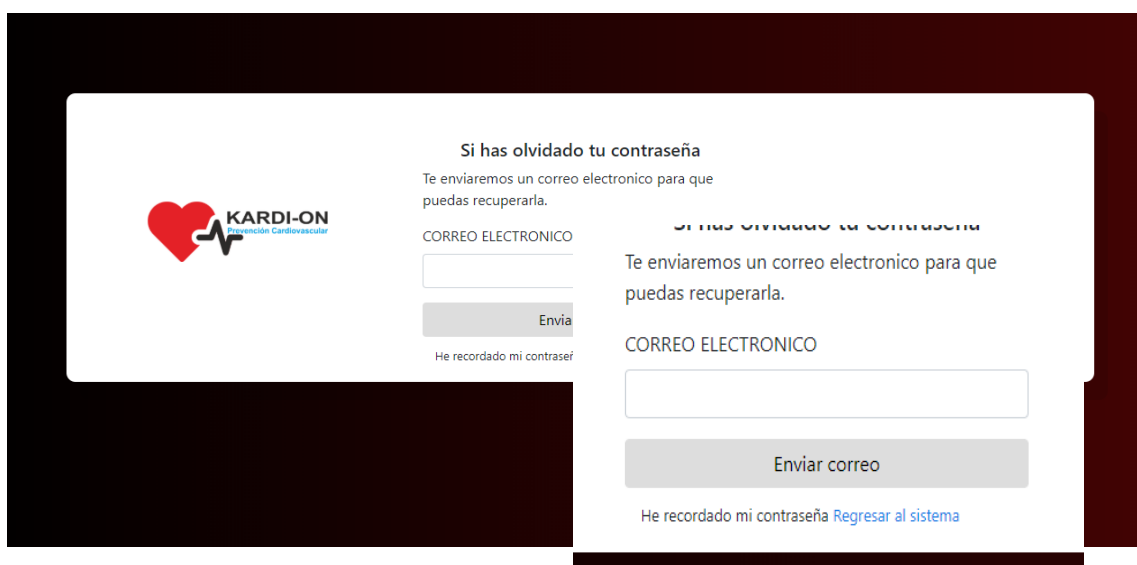


The screenshot shows the password recovery page. On the left, there is a form with the KARDI-ON logo and a title 'Si has olvidado tu contraseña'. Below the title, it says 'Te enviaremos un correo electronico para que puedas recuperarla.' and there is a field for 'CORREO ELECTRONICO' with an 'Envía' button. On the right, there is a zoomed-in view of the same form, showing the 'Envía correo' button and a link that says 'He recordado mi contraseña Regresar al sistema'.

Abre tu correo electrónico y busca un email enviado por [kardion@kardion.es](mailto:kardion@kardion.es) en el encontraras la tu nueva contraseña.

[Cambiar mi contraseña](#)

Entra en [www.kardion.es](http://www.kardion.es) e inicia sesión con tu cuenta de Kardion.

Has click en el botón con tu correo electrónico que se encuentra localizado en la parte superior izquierda

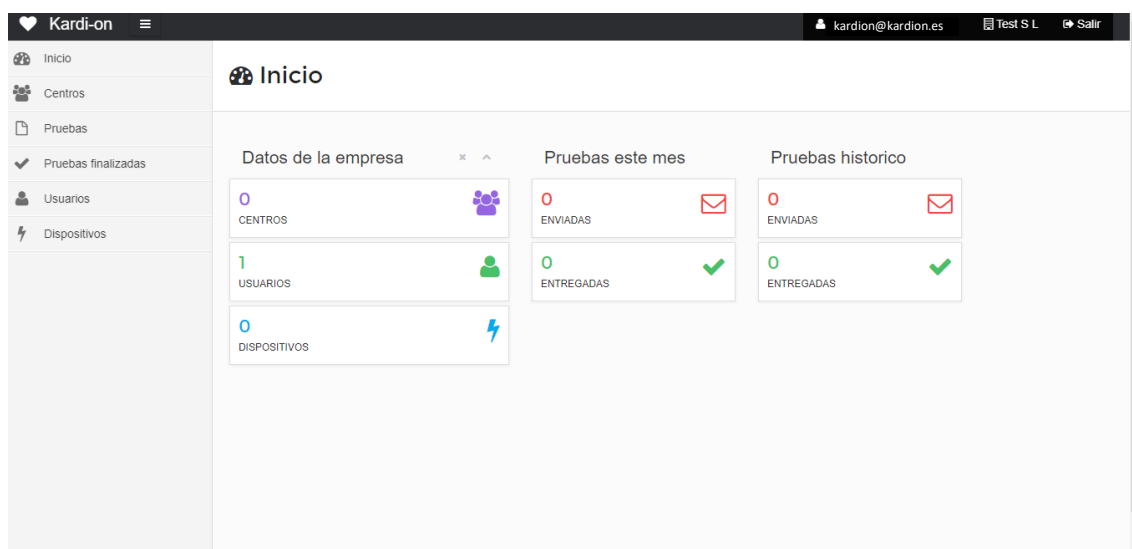

Escribe tu contraseña actual y dos veces tu nueva contraseña y presiona el botón guardar

