



Contenido


Primeros pasos en KARDION	2
Crear un centro	2
Vincular un dispositivo con tu cuenta KARDION	5
Asignar un dispositivo	7
Enviar una prueba a revisión	9
Crear un paciente nuevo	10
Buscar un paciente	11
Rellenar y adjuntar la prueba	12
Recuperar la contraseña perdida	13
Cambiar mi contraseña	14

Primeros pasos en KARDION


Para empezar a enviar pruebas desde KARDION debe configurar algunas Funciones antes. A continuación, se describen dichos pasos.

Crear un centro


El primer paso será crea un centro para enviar las pruebas desde el. Para crear un centro nuevo haga click en la opción “Centros” localizado en el menú latera

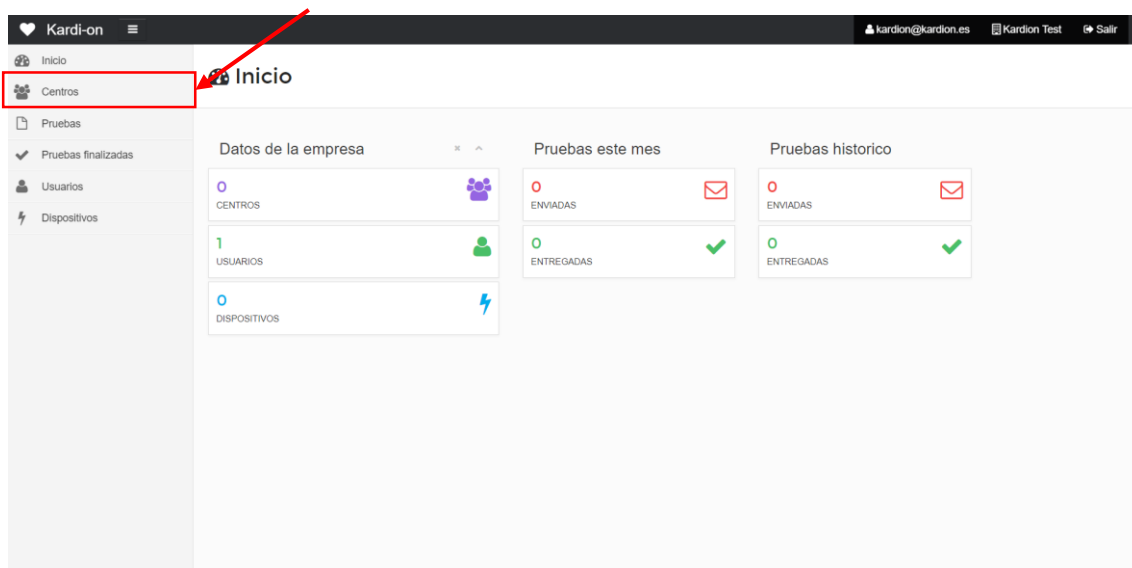

A continuación, se muestra una lista con los centros creados. Haga click en el botón “Nuevo”

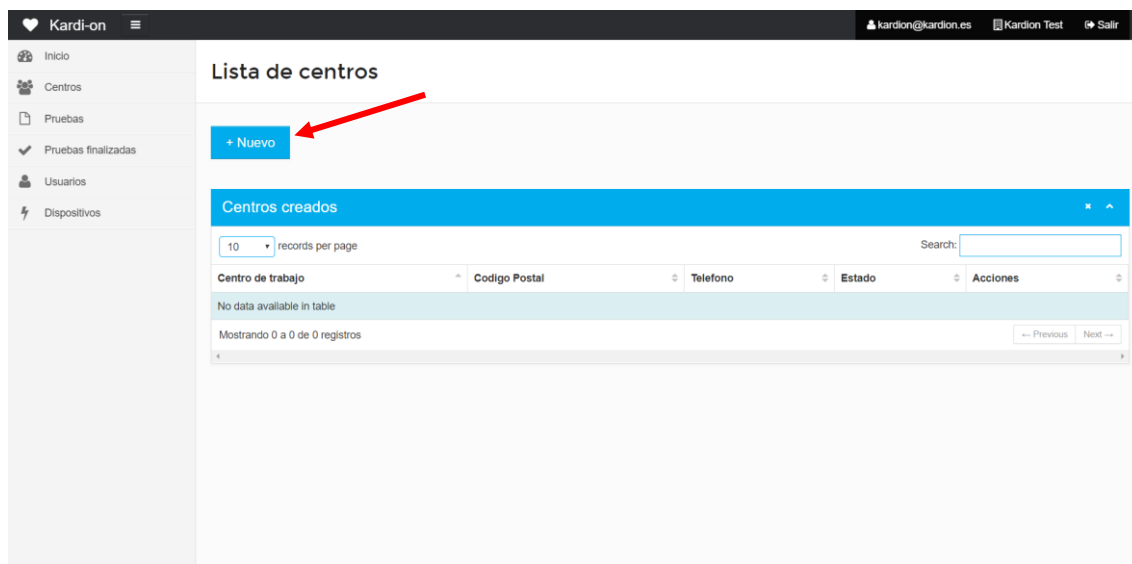

Rellena los datos del centro en el formulario que parece a continuación.

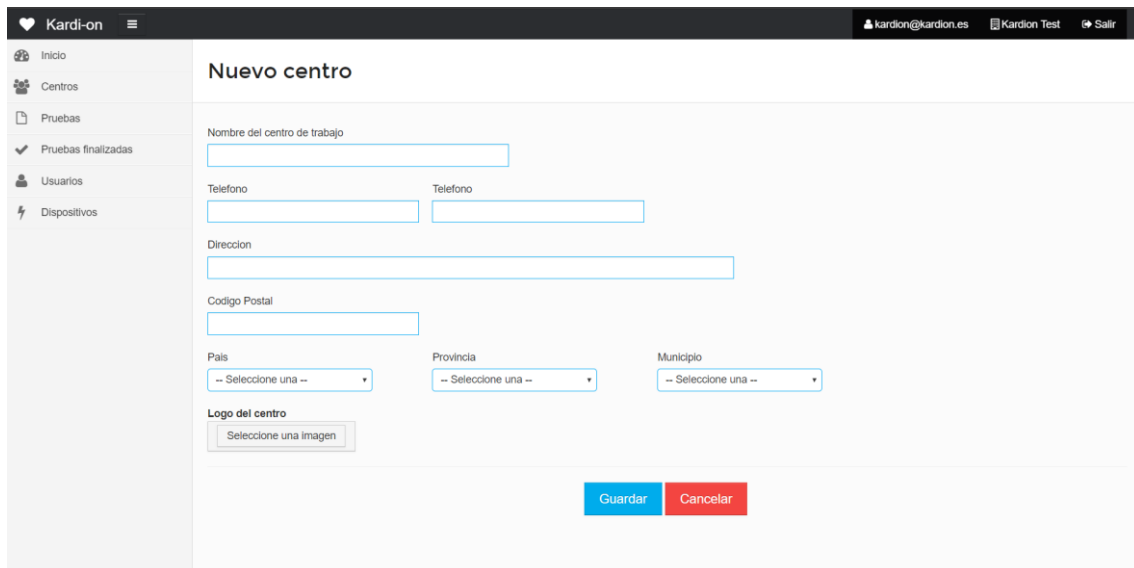

Nuevo centro

Nombre del centro de trabajo

Telefono Telefono

Direccion


Codigo Postal

Pais Provincia Municipio


Logo del centro

Importante: debes seleccionar el logotipo del centro ya que este se mostrará en los informes médicos.

Para seleccionar el logotipo del centro haga click en el botón “seleccione una imagen” y a continuación desplázate hasta la carpeta donde tengas almacenado el logotipo de tu centro.

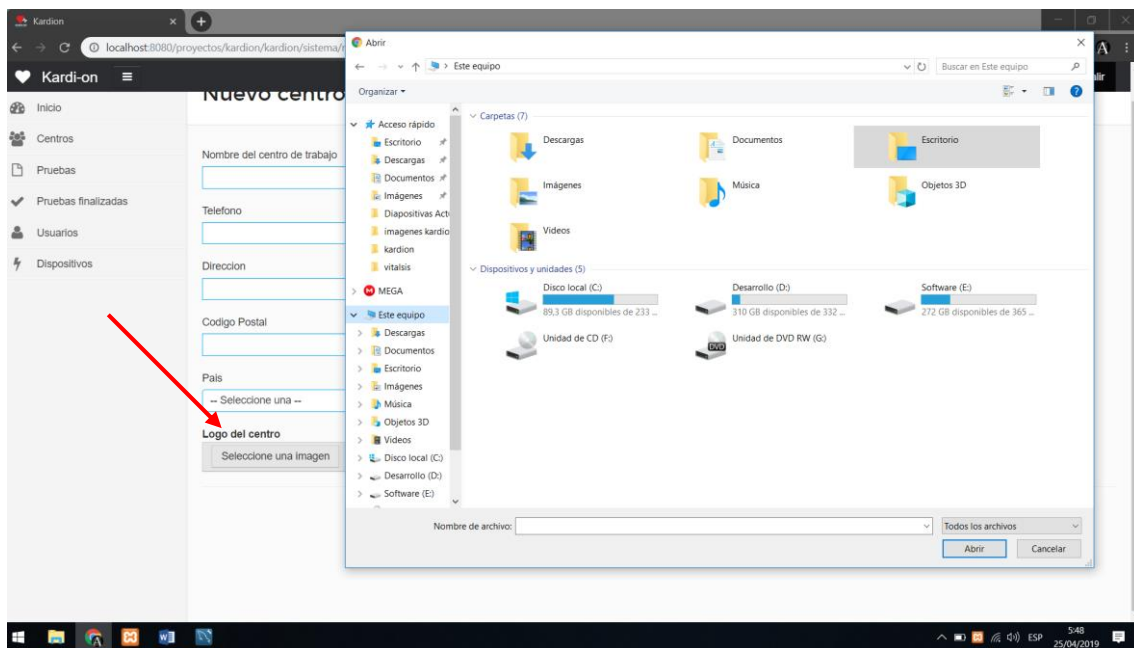

Para finalizar has click en el botón “Guardar”, Se mostrará una ventana confirmando que el centro ha sido creado

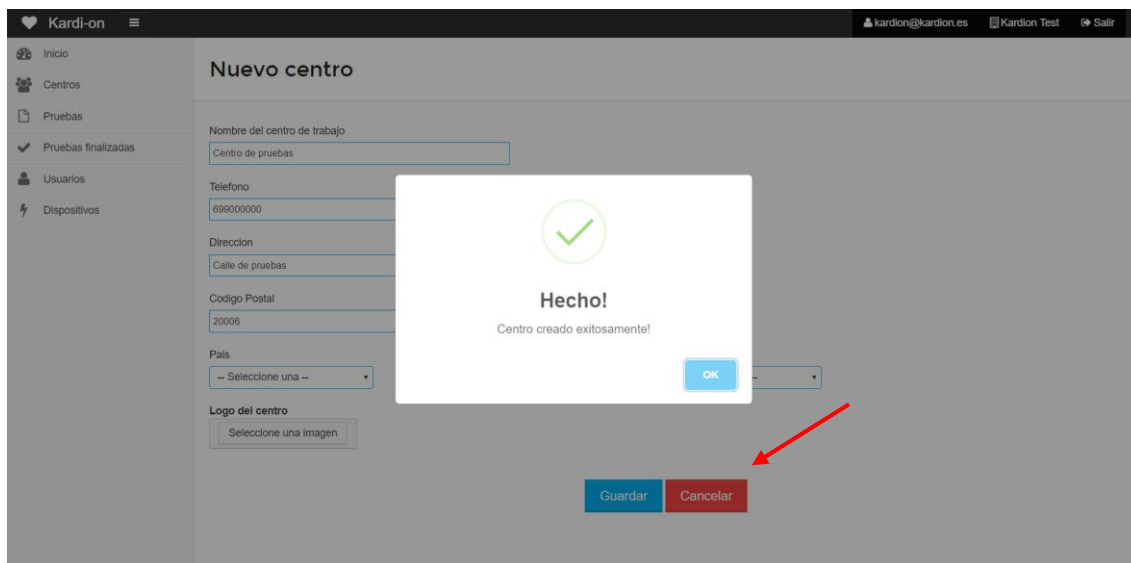

Nuevo centro

Nombre del centro de trabajo
Centro de pruebas

Telefono
699000000

Direccion
Calle de pruebas

Codigo Postal
20006

País
-- Seleccione una --


Logo del centro
Seleccione una imagen

Hecho!
Centro creado exitosamente!

OK

Guardar Cancelar

KARDION te direccionara automáticamente a la lista de centros. Si deseas modificar los datos del centro (nombre, dirección, teléfono y logotipo). Haga click en el botón editar y guarda los cambios.

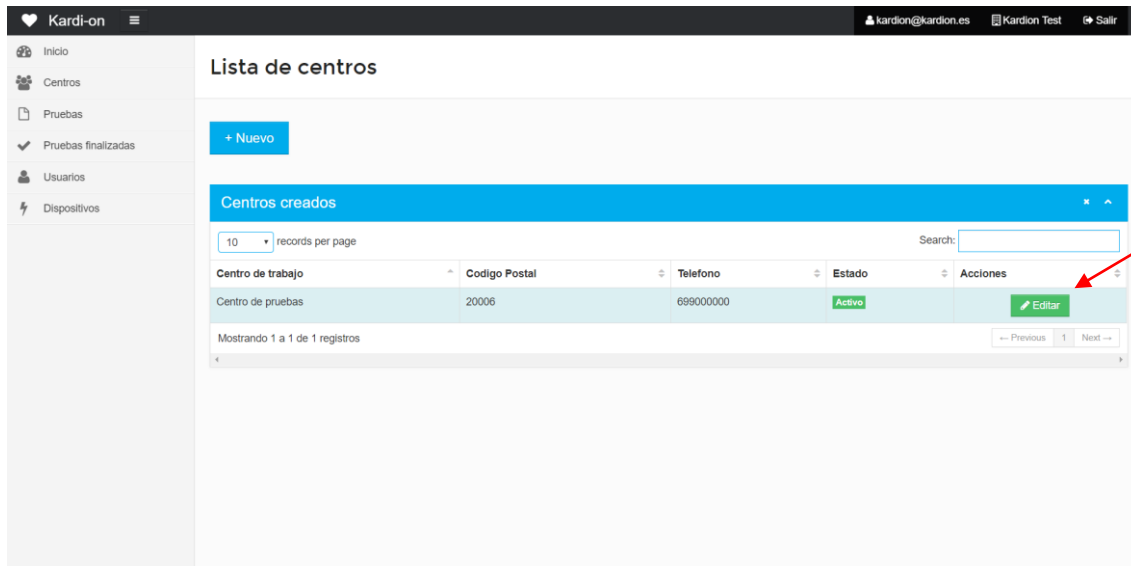

Lista de centros

+ Nuevo

Centros creados

10 records per page Search:


Centro de trabajo	Codigo Postal	Telefono	Estado	Acciones
Centro de pruebas	20006	699000000	Activo	Editar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next


Vincular un dispositivo con tu cuenta KARDION

Para vincular un dispositivo o varios haga click en el botón “Dispositivos” ubicado en el menú lateral.

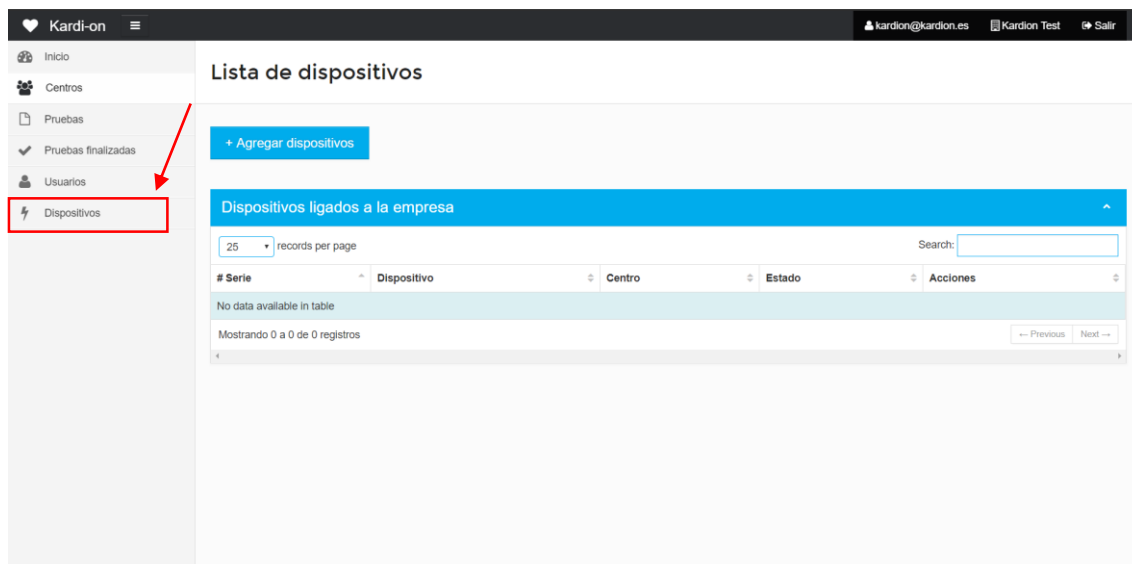

The screenshot shows the Kardi-on web application interface. On the left sidebar, the 'Dispositivos' menu item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area is titled 'Lista de dispositivos' and contains a blue button labeled '+ Agregar dispositivos'. Below this, there is a section titled 'Dispositivos ligados a la empresa' which includes a search bar, a table with columns for '# Serie', 'Dispositivo', 'Centro', 'Estado', and 'Acciones', and a message 'No data available in table'. The table also shows 'Mostrando 0 a 0 de 0 registros'.

A continuación, se muestra una lista con los dispositivos vinculados. Haga click en el botón “Agregar dispositivos”

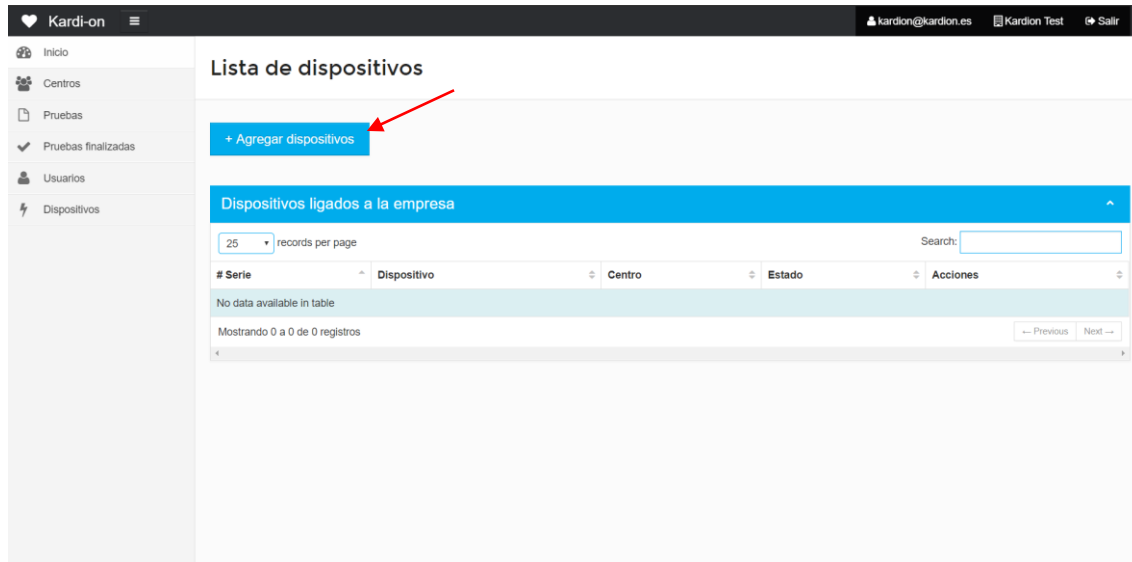


This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Lista de dispositivos' page. In this view, the '+ Agregar dispositivos' button is highlighted with a red arrow. The rest of the interface, including the sidebar and the 'Dispositivos ligados a la empresa' section, remains the same.


Recuerda tener tu dispositivo a mano.

Escribe el número de serie del dispositivo y selecciona el modelo

Importante: el número de serie que escribas debe y el modelo que selecciones deben coincidir con la etiqueta en la parte posterior de tu dispositivo.

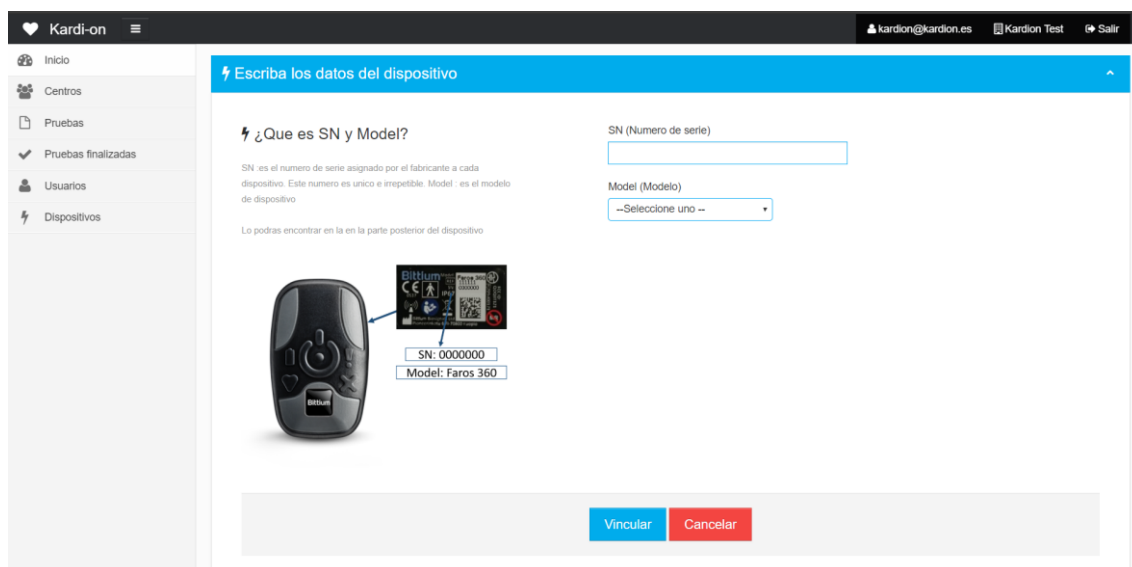


A continuación, haga click en el botón “Vincular “. KARDION le mostrara un mensaje de confirmación

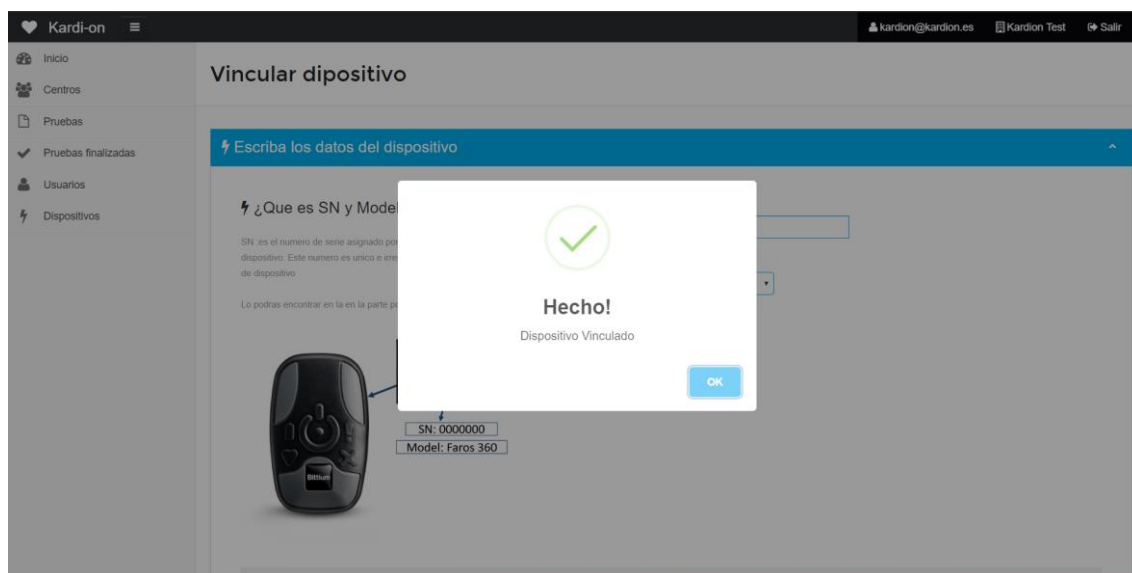

KARDION le direccionara automáticamente a la lista de Dispositivos

Asignar un dispositivo

Para poder enviar pruebas desde KARDION debe asignar un **dispositivo** a un **centro**. Diríjase hacia el botón dispositivos en el menú lateral y haga click sobre él.

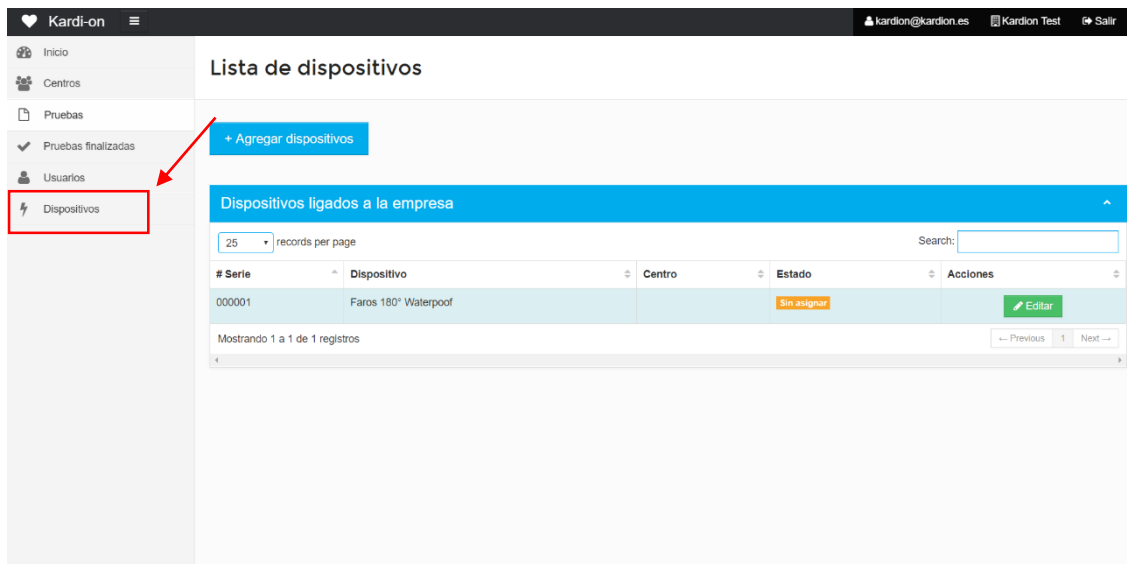

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa

25 records per page Search:

# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof		Sin asignar	Editar


Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next

Se mostrará un listo con todos dispositivos vinculados a tu cuenta. En dicha lista se muestran ordenados los dispositivos por número de serie, el “estado” define la situación en la que se encuentra actualmente el dispositivo.

Si es la primera vez que realiza estos pasos tendrá un dispositivo con el estado “Sin Asignar” marcado con color amarillo.

Para asignar el dispositivo haga click en el botón “Editar” correspondiente al dispositivo que quiera asignar

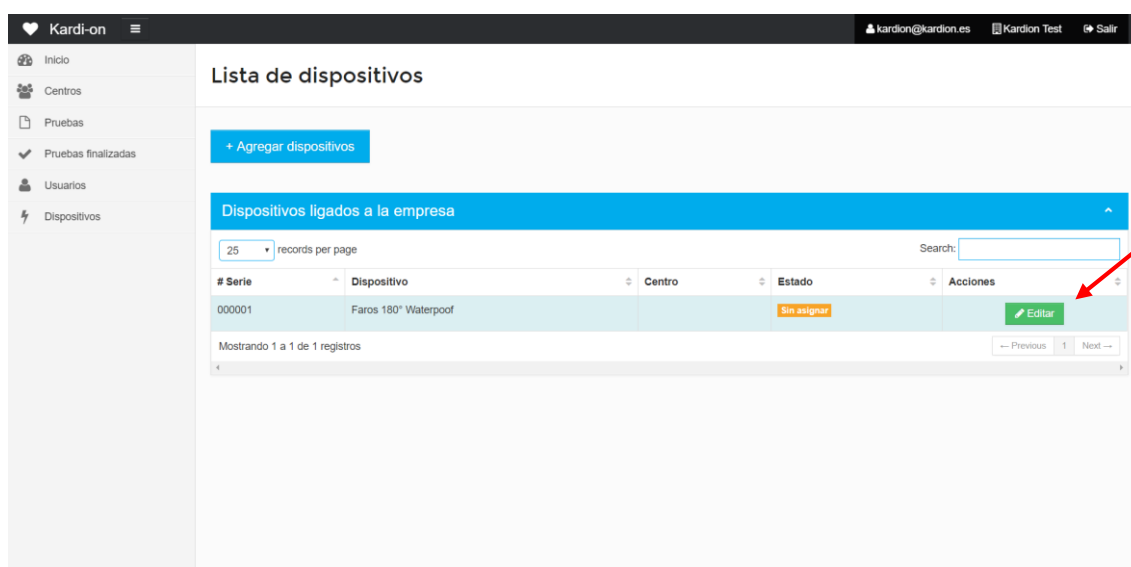

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa


25 records per page Search:

# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof		Sin asignar	Editar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next

Se mostrará una pantalla con los datos del dispositivo y el estado. Selecciona el centro al que quieras asignar el dispositivo y haga click en el botón “Guardar”

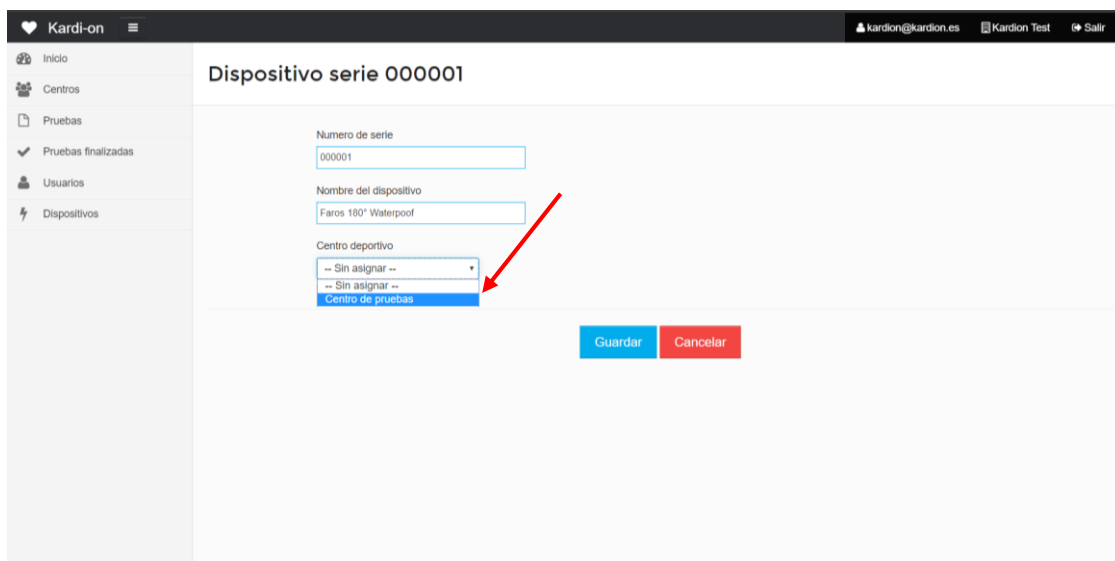

Dispositivo serie 000001


Numero de serie
000001

Nombre del dispositivo
Faros 180° Waterproof

Centro deportivo
 -- Sin asignar --
 -- Sin asignar --
 Centro de pruebas

Guardar Cancelar

El estado del dispositivo debería aparecer en color verde y con el texto “Asignado”

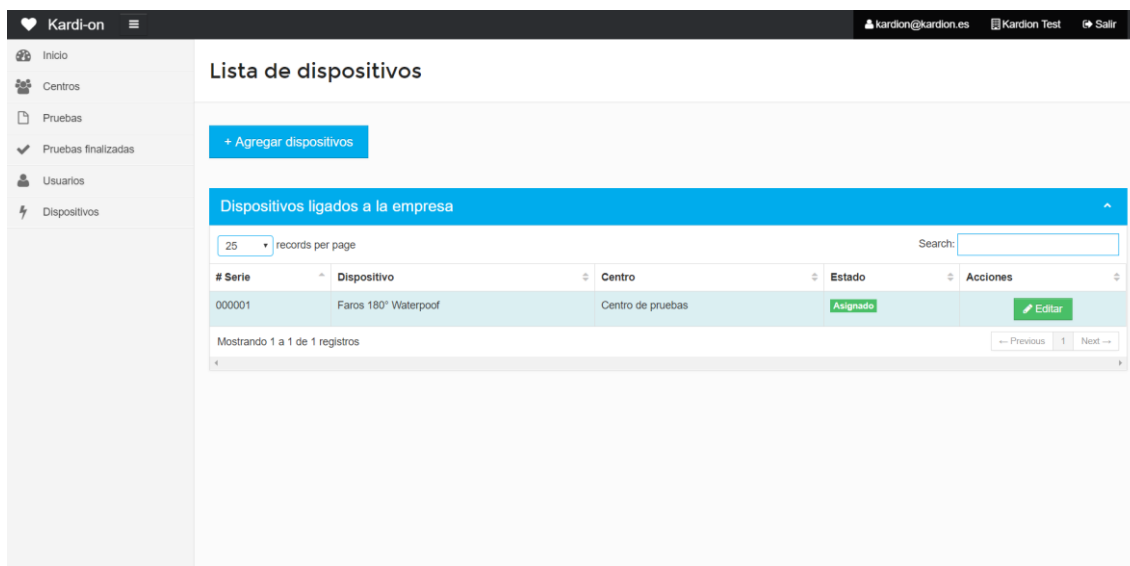

Lista de dispositivos

+ Agregar dispositivos

Dispositivos ligados a la empresa

25 records per page Search:


# Serie	Dispositivo	Centro	Estado	Acciones
000001	Faros 180° Waterproof	Centro de pruebas	Asignado	Editar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Previous 1 Next


Enviar una prueba a revisión

Para enviar una prueba haga click en el botón “Pruebas” en el menú lateral.

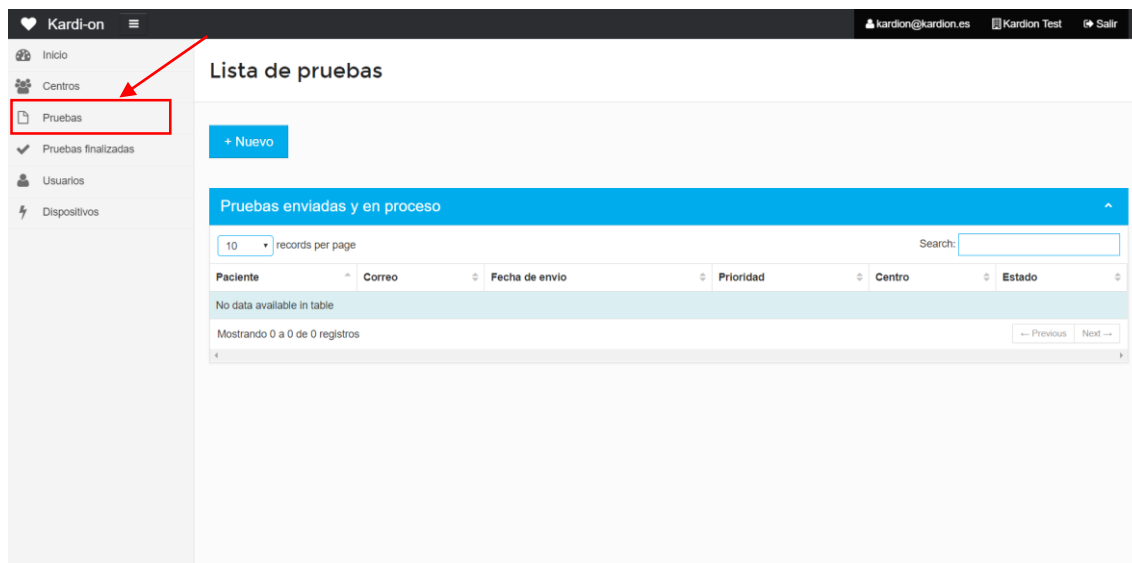

A continuación, se mostrar una lista con todas las pruebas que estén pendientes o en proceso de revisión.

Para crear una nueva prueba has click en el botón “Nuevo”

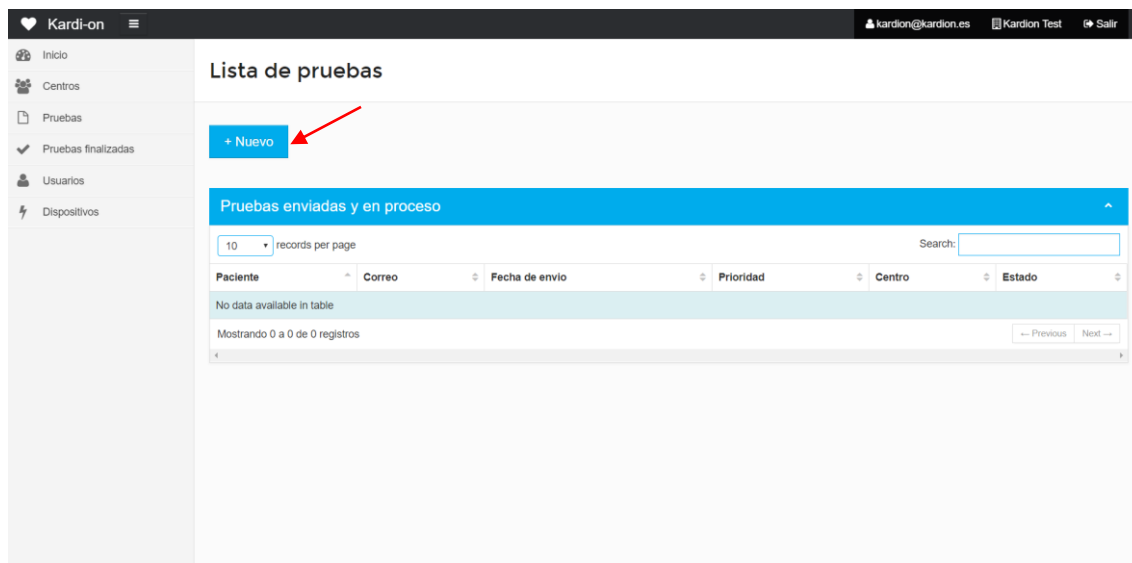


Tienes dos opciones:

- Buscar un paciente existente
- Crear un paciente nuevo

Crear un paciente nuevo


Para crear un paciente nuevo. En la ventana “nueva prueba” haga click en el botón “Crear Paciente”

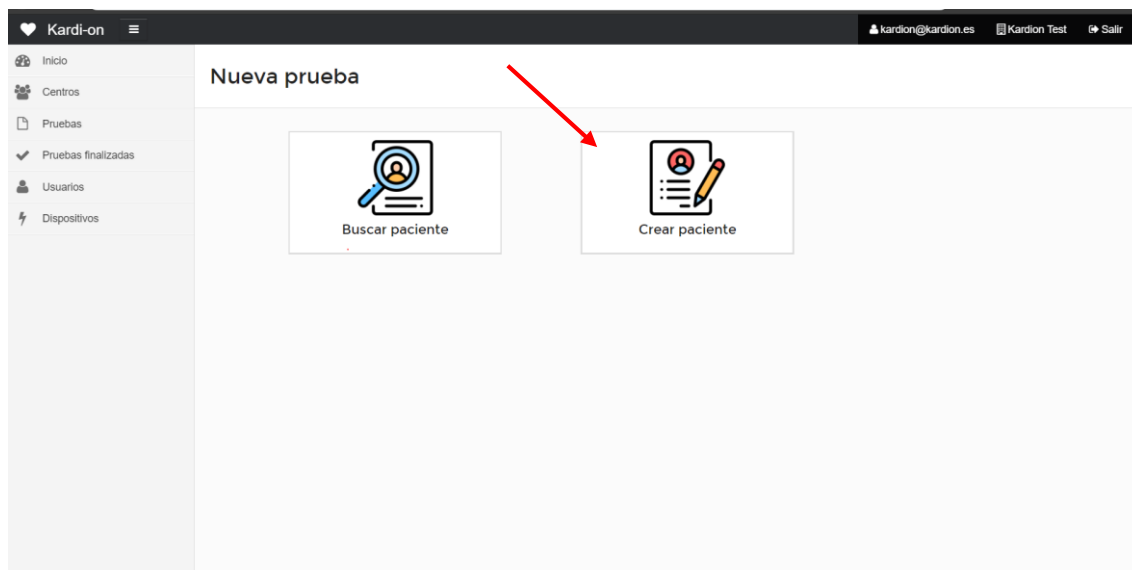

A continuación, se mostrará una ventana emergente con un formulario que deberá rellenar con los datos del paciente.

Importante : El campo “Correo Electrónico” debe ser el correo personal del paciente o un correo al que el paciente tenga acceso ya que Kardion enviara un correo de confirmación de cuenta y la política de privacidad.


Para finalizar haga click en guardar.

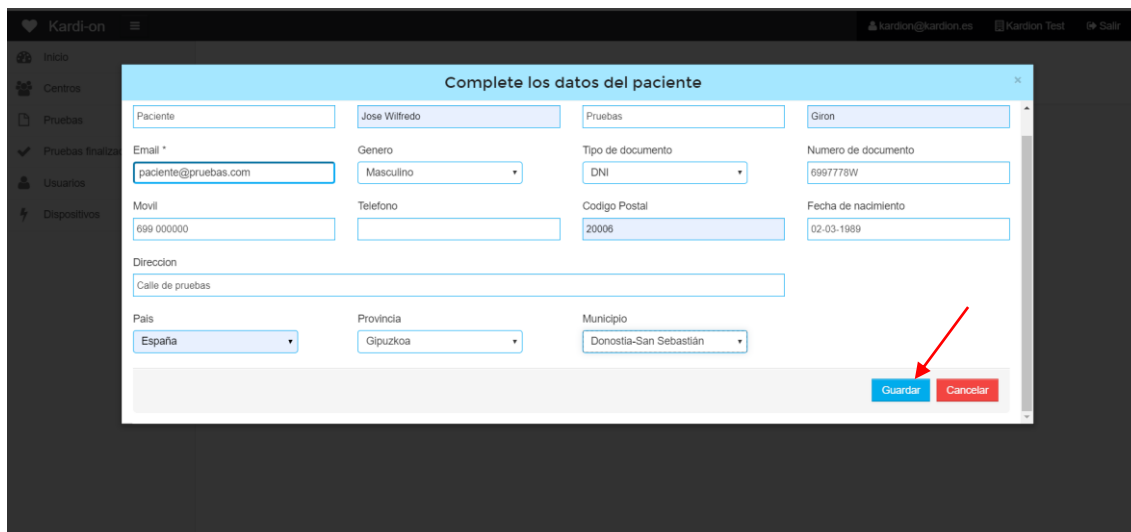


Complete los datos del paciente			
Paciente	Jose Wilfredo	Pruebas	Giron
Email *	Genero	Tipo de documento	Numero de documento
paciente@pruebas.com	Masculino	DNI	6997778W
Movil	Telefono	Codigo Postal	Fecha de nacimiento
699 000000		2006	02-03-1989
Direccion			
Calle de pruebas			
Pais	Provincia	Municipio	
Espana	Gipuzkoa	Donostia-San Sebastián	
<div> Guardar Cancelar </div>			

Buscar un paciente

Para buscar un paciente existente. En la ventana “nueva prueba” haga click en el botón “Buscar Paciente”

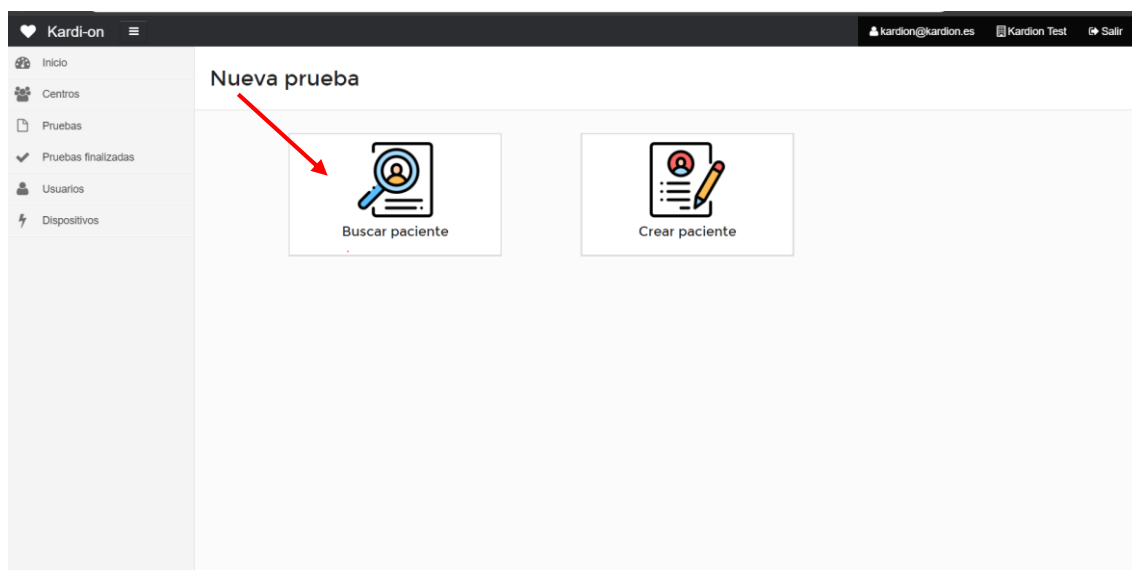

A continuación, se mostrará una ventana emergente un campo único en el cual deberá escribir el nombre o el correo electrónico del paciente y haga click en el botón “Buscar”

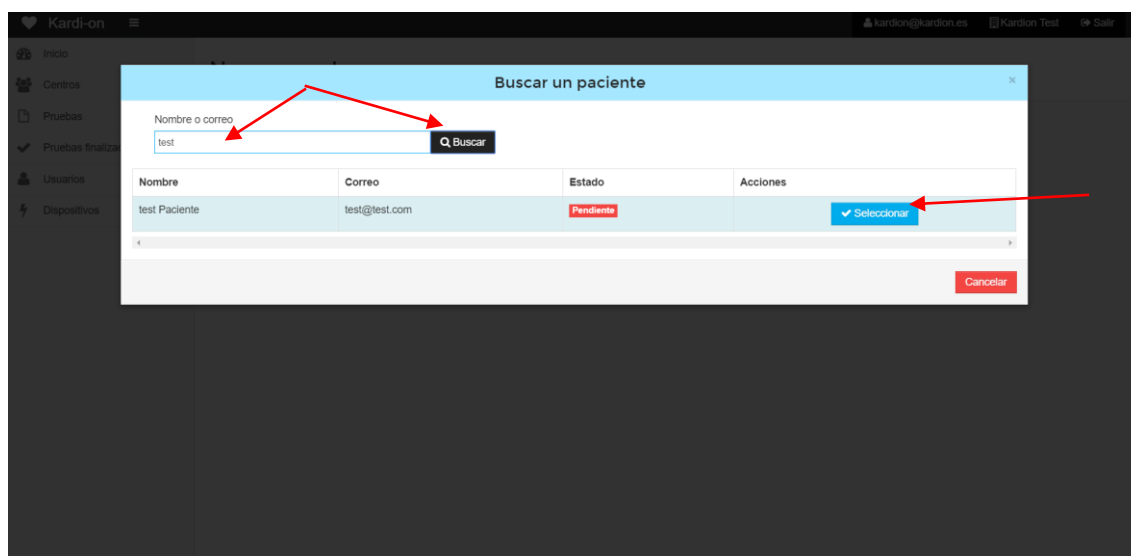


Se mostrará una lista con los pacientes que coincidan con su búsqueda. A continuación, haga click en el botón seleccionar correspondiente al paciente.

Rellenar y adjuntar la prueba


Habiendo creado o seleccionado un paciente en la pantalla “nueva prueba” KARDION le direccionara a un formulario para adjuntar y llenar la información de la prueba realizada

En el deberá llenar datos obligatorios como el centro del que se envía la prueba, el dispositivo con el que fue realizada la prueba y el archivo de la prueba.

Importante: Entre más datos llene sobre la prueba. El resultado medico será más preciso.

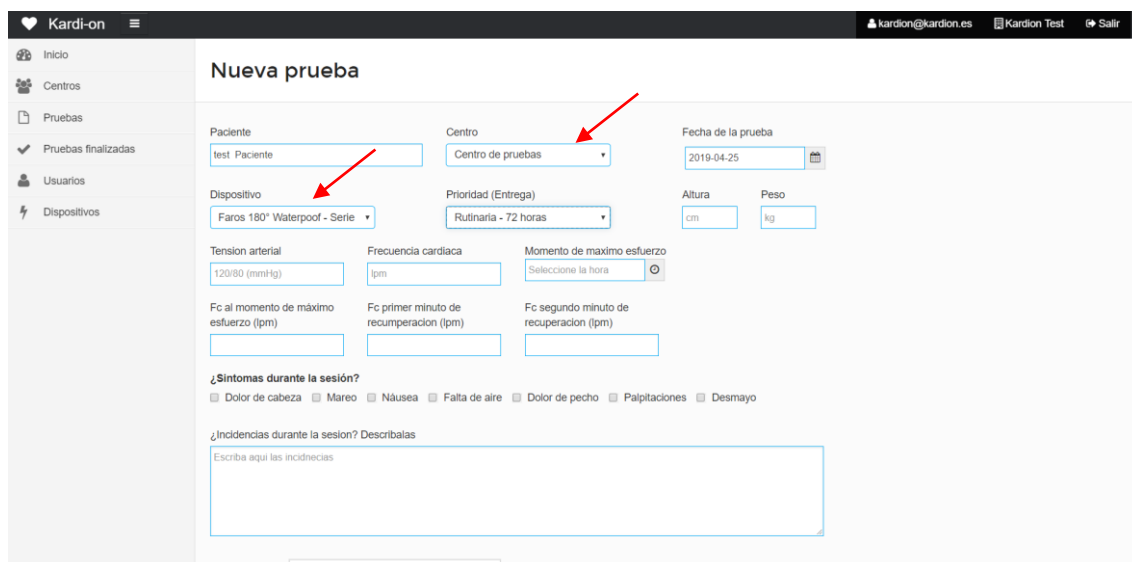

Adjunte la prueba: para adjuntar la prueba haga click en el botón “Adjuntar archivo de la prueba”, se abrirá una ventana en la cual deberá seleccionar el archivo de la prueba ECG, dicho archivo se encuentra ubicado en la memoria de su dispositivo.

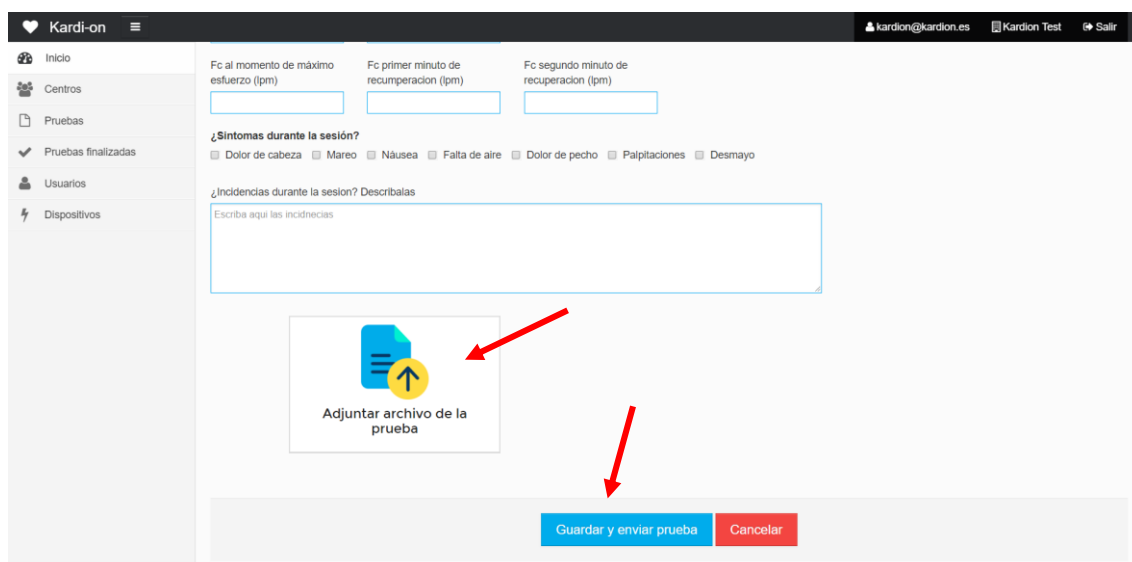


Para finalizar haga click en el botón Guardar y enviar

Recuperar la contraseña perdida

Paso 1:


Entra en www.kardion.es y a continuación haga click en el enlace “Recuperar”

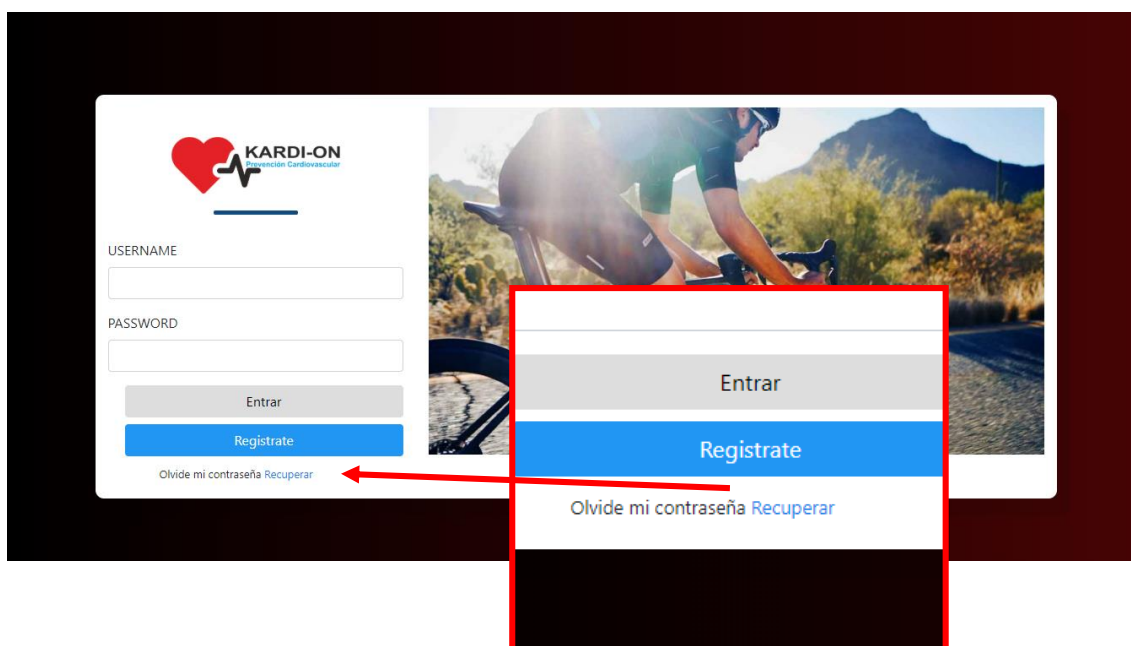

The screenshot shows the KARDI-ON login page. On the left, there is a login form with fields for 'USERNAME' and 'PASSWORD', and buttons for 'Entrar' (grey) and 'Registrate' (blue). Below the 'Registrate' button is a link that says 'Olvide mi contraseña Recuperar'. A red arrow points from this link to a red-bordered box on the right. This box contains a zoomed-in view of the login area, showing the 'Entrar' and 'Registrate' buttons, and the 'Olvide mi contraseña Recuperar' link, which is highlighted in blue.

Paso 2:

Escriba su correo electrónico con el que se ha registrado y presione el botón enviar. Kardion te enviara un correo electrónico con una contraseña nueva generada aleatoriamente.

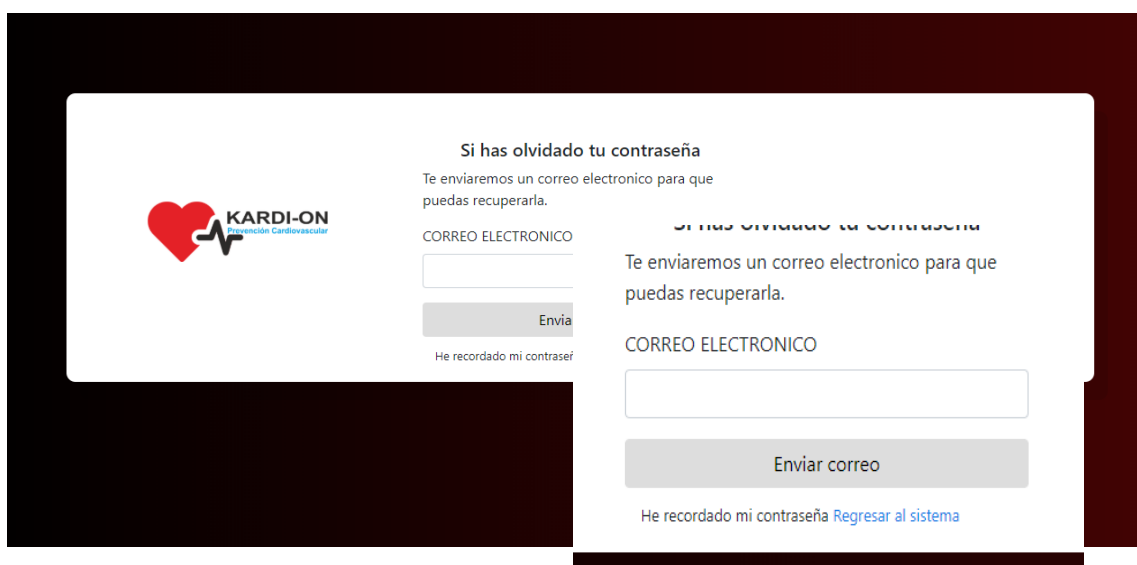


The screenshot shows the KARDI-ON password recovery page. On the left, there is a form titled 'Si has olvidado tu contraseña' (If you have forgotten your password). It includes the KARDI-ON logo, a text box for 'CORREO ELECTRONICO', and a grey 'Envía' button. Below the button is a link that says 'He recordado mi contraseña'. On the right, there is a zoomed-in view of the same form, showing the 'CORREO ELECTRONICO' text box, the 'Enviar correo' button, and the 'Regresar al sistema' link.

Abre tu correo electrónico y busca un email enviado por kardion@kardion.es en el encontraras la tu nueva contraseña.

[Cambiar mi contraseña](#)

Entra en www.kardion.es e inicia sesión con tu cuenta de Kardion.

Has click en el botón con tu correo electrónico que se encuentra localizado en la parte superior izquierda

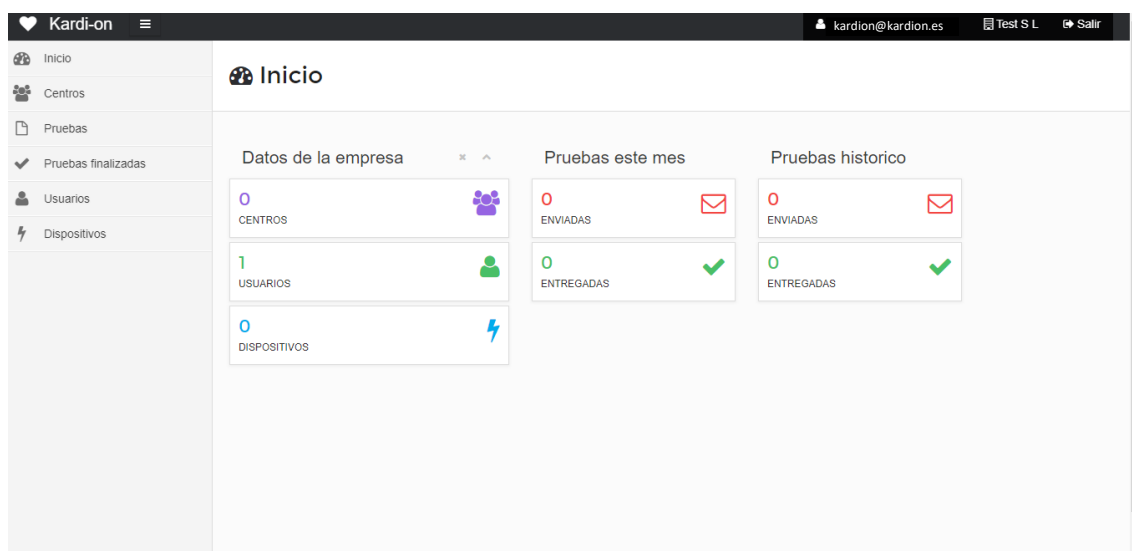

Escribe tu contraseña actual y dos veces tu nueva contraseña y presiona el botón guardar

